

クラブウ 核酸分離システム



QuickGene Mini480/8L、Auto12S キャンペーン

2023.12.01(金) ~ 2024.03.20(水)

期間内の
お申込み分まで

クラブウから提供されていますQuickGene Mini480/8Lはコンパクトかつ革新的なメンブレンを搭載した核酸抽出システムです。各種専用キットと組み合わせることで様々なサンプルから高純度・高収量のDNA/RNAを短時間で回収することができます。この度、「QuickGene-Mini480」と「QuickGene-Mini8L」のキャンペーンを行います。ぜひこの機会にQuickGeneシステムを使った核酸抽出をお試しください!!

キャンペーン ①

専用の同一キット 8キット 一括購入頂いたユーザー様へ・・・

**QuickGene-Mini480 または 8L を
1台プレゼント!!**

キャンペーン ②

多検体サンプルも大容量サンプルも処理したいユーザー様へ・・・

**QuickGene-Mini480 + 変換アダプタセットを
250,000円でご提供!! (希望納入価格 438,000円)**

アダプターを取り換えることにより、QuickGene-Mini480 (最大 200 μ L, 48サンプル) を大容量サンプル (最大 2 mL, 8サンプル) に切替えることができます。

QuickGene-Mini480



QuickGene-Mini8L



QGMMini Lタイプ変換アダプタセット



キャンペーン ③

※詳細は p.3 をご参照ください

多様なサンプルを素早く処理したいユーザー様へ・・・

QuickGene-Auto12S サブスクキャンペーン

キャンペーン 申込方法

- 本紙裏面の申込用紙に必要事項をご記入いただき、富士フイルム和光純薬の販売代理店、または富士フイルム和光純薬の担当営業へお渡しください
- QuickGene - Mini480 および QuickGene-Mini8Lの専用キットに関する詳細は本パンフレット2,3ページをご参照ください

卓上型でコンパクトかつ高品質な核酸抽出(最大48サンプル)が可能！！

QuickGene-Mini480

QuickGene-Mini480は分離工程で遠心分離のいらないコンパクトな核酸分離装置です。専用キットを使用することで様々な検体（全血、組織、細胞、植物、ウイルスなど）からDNA/RNAを抽出することが可能です。

■ 多検体を簡便・迅速に操作!!

- 前処理サンプルをセットし、本体左右のスイッチを回すだけです。
- 分離工程に遠心分離は必要ありません。
- 一度に最大48検体を処理可能です。

対応
サンプル

全血

動物
組織

プラスミド

ウイルス

etc...

■ 操作手順



■ QuickGene-Mini480 専用キット一覧

	分離対象	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格(円)	分離例
DNA 用	●ヒト全血	636-23541 (DB-S)	DNA全血キットS	96回用	39,000	約5μg/全血200μL
	●各種動物血液					
	●血漿 ●血清	633-23551 (DT-S)	DNA組織キットS	96回用	44,000	約4μg/Balb/c マウステール 先端部5mg
	●各種動物組織					
RNA 用	●植物 ●昆虫 ●魚介類					
	●口腔粘膜					
	●パラフィン包埋切片					
	●培養細胞 ●バクテリア					
	●ウイルス ●食品					
	●大腸菌	630-23561 (PL-S2)	プラスミドキットS II	96回用	24,000	約12.5μg/ pBlueScript II/ GADPH/DH5α 1mLカルチャー
	●各種動物組織	634-23601 (RT-S2)	RNA組織キットS II	96回用	52,000	約100μg/マウス肝臓30mg
	●昆虫 ●ウイルス	634-23581 (RC-S)	RNA培養細胞キットS	96回用	52,000	約10μg/HL60細胞 (1.0×10 ⁶ 個)
	●浮遊細胞					
	●接着細胞 (目安: 1.0×10 ⁶ 個以下)	631-23591 (RC-S2)	RNA培養細胞HCキットS	96回用	52,000	90~150μg/HEK293細胞 (10cmディッシュ)
	●植物 ●大腸菌					
	●浮遊細胞	637-23571 (RB-S)	RNA血液細胞HCキットS	96回用	62,000	約4.5μg/白血球1.5×10 ⁷ 個
	●接着細胞 (目安: 1.5×10 ⁷ 個以下)					
	●全血から分離した白血球					

卓上でコンパクトかつ大容量サンプルからの核酸抽出(最大8サンプル)が可能！！


QuickGene-Mini8L

小型で軽量なQuickGene-Mini8L は実験デスクの小さなスペースにも設置することができ、持ち運びも簡単です。また、大容量サンプル（例；2mL 全血、100mg マウス肝臓等）からのDNA 分離が可能であり、一度の処理で大量のDNA を得ることができます。


■ 多検体を簡便・迅速に操作!!

- 前処理サンプルをセットし、本体左右のスイッチを回すだけです。
- 分離工程に遠心分離は必要ありません。
- 一度に最大8検体を処理可能です。

■ 操作手順

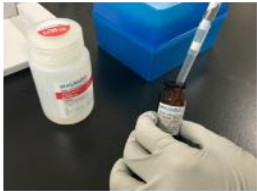

1.前処理

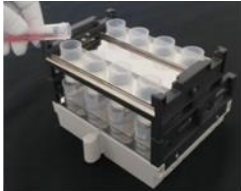

2.前処理したサンプルをアプライ




3.加圧シールプレートを着着



4.ホルダを本体にセット



5.スイッチを回して1列目を加圧

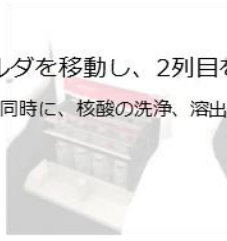

6.ホルダを移動し、2列目を加圧
同時に、核酸の洗浄、溶出を行う

■ QuickGene-Mini8L 専用キット一覧

	分離対象	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格(円)	分離例
DNA 用	●ヒト全血 ●各種動物血液 ●血漿 ●パフィーコート ●各種動物組織 ●植物	639-23531 (DB-L)	DNA全血キット	48回用	56,000	約50µg/全血2mL
	●昆虫 ●魚介類 ●口腔粘膜 ●パラフィン包埋切片 ●培養細胞 ●バクテリア ●ウイルス ●食品	638-29581 (DT-L)	DNA組織キット	48回用	75,000	約80µg/マウス肝臓100mg
	●血漿	632-47061 (CF-L)	QuickGene cfDNA Isolation Kit	48回用	98,000	血漿2mL

【台数限定】 QuickGene-Auto12S サブスクキャンペーン

QuickGene-Auto12S は、多様なサンプル（最大200 µL）からDNA/RNAを分離する卓上サイズの核酸自動分離装置です。遠心不要の抽出工程と12連同時駆動の液体ハンドリングシステムにより、自動スピード処理を実現します。またプレバックタイプの試薬キット(各48サンプル分)を採用しており、試薬分注の手間を省くとともに、コンタミネーションリスクを低減しています。

■ QuickGene-Auto12S 専用キット一覧


	製造元コード	コードMo.	品名	容量	希望納入価格(円)
DNA 用	AS-DB	635-44751	QuickGene AutoS DNA Blood Kit	48回用	36,000
	AS-DT	632-44761	QuickGene AutoS DNA Tissue Kit	48回用	34,000
	AS-PL	639-46231	QuickGene AutoS Plasmid Kit	48回用	38,000
RNA 用	AS-RB	636-46241	QuickGene AutoS RNA Blood Kit	48回用	42,000
	AS-RT	630-46261	QuickGene AutoS RNA Tissue Kit	48回用	38,000
	AS-RC	633-46251	QuickGene AutoS RNA Cultured Cell Kit	48回用	38,000
	AS-DF	636-49801	QuickGene AutoS DNA FFPE Kit	48回用	59,000
	AS-RV	633-50801	QuickGene AutoS RNA Virus Kit	48回用	42,000
	AS-RF	633-53461	QuickGene-AutoS RNA FFPE Kit	48回用	65,000



QuickGene-Auto12S をキットの年間購入数に応じて、お得な価格でご提供します。
裏面のキャンペーンお申込書フォーマットにてお見積りを依頼ください。

■ 申込方法

お申込用紙に必要事項を記入ください

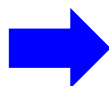

富士フィルム和光純薬の販売店ご担当者様、
もしくは富士フィルム和光純薬の営業担当者へ
お渡しください

■ お申込フォーマット

氏名		
	(企業名/大学名)	(部署名/学部・学科名)
所属		
	(TEL)	(FAX)
連絡先		
	(E-mail)	販売店
お申し込み キャンペーン	☐ キャンペーン①：8キット購入でQuickGene-Mini480/8Lを1台プレゼント → 「ご購入製品」も記載ください ☐ キャンペーン②：QuickGene-Mini480 + 変換アダプタセット を25万円でご提供 ☐ キャンペーン③：QuickGene-Auto12S サブスクキャンペーン → 「ご購入製品」も記載ください	
ご購入製品		
・ QuickGene-Mini480 (キャンペーン①) ☐ DNA全血キットS 数量 ☐ DNA組織キットS 数量 ☐ プラスミドキットS II 数量 ☐ RNA組織キットS II 数量 ☐ RNA培養細胞キットS 数量 ☐ RNA培養細胞HCキットS 数量 ☐ RNA血液細胞HCキットS 数量 ・ QuickGene-Mini8L (キャンペーン①) ☐ DNA全血キットL 数量 ☐ DNA組織キットL 数量 ☐ cfDNA Isolation Kit 数量 ・ QuickGene-Auto12S サブスクキャンペーン (キャンペーン③) 予定している1ヵ月あたりのキット購入数を 教えてください 数量/月 ※購入予定数量に応じて、販売店様経由でお見積りをお出しします		

Ref...2~10℃保存 F...-20℃保存 -80...-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。

特 定 毒 1 … 特 定 毒 物 毒 1 … 毒 Ⅱ … 毒 物 劇 1 … 劇 Ⅱ … 劇 Ⅲ … 劇 物 毒 薬 … 毒 薬 劇 … 劇 薬 危 … 危 険 物 向 … 向 精 神 薬 特 麻 原 … 特 定 麻 薬 向 精 神 薬 原 料 カルタヘナ … カルタヘナ 法

密 1 … 化 審 法 第 一 種 特 定 化 学 物 質 密 2 … 化 審 法 第 二 種 特 定 化 学 物 質 化 兵 1 … 化 学 兵 器 禁 止 法 第 一 種 指 定 物 質 化 兵 2 … 化 学 兵 器 禁 止 法 第 二 種 指 定 物 質

覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。覚

国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。

上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- キャンペーンは富士フィルムと光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
●東海営業所 ●横浜営業所
●筑波営業所 ●東北営業所
●北海道営業所
-  フリーダイヤル 0120-052-099
試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

 フリーダイヤル 0120-052-099試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

- | | |
|--|--|
| <p>■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL:+1-804-714-1920 FAX:+1-804-271-7791</p> | <p>■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Lagerstr. 12, 41468 Neuss, Germany
TEL:+49-2131-311-0 FAX:+49-2131-311-100</p> |
| <p>■ 富士片和光 (香港) 有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 She Tsui Road, Tuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL:+852-2799-9019 FAX:+852-2799-9808</p> | <p>■ 富士片和光 (杭州) 貿易有限公司
广州市番禺区光雅里96号东山广场30楼3002-3003室
TEL:+86-20-6273-6381 (广州)
TEL:+86-21-6288-4751 (上海)
TEL:+86-10-5613-9338 (北京)</p> |