


抗体N型糖鎖分析キット EZGlyco[®] mAb-N Kit with 2-AB

培養液から抗体精製、N型糖鎖サンプル調製を 2.5 時間で完了

抗体産生細胞の培養上清から抗体由来糖鎖を調製するには多くの時間（1～2日）を要し、その作業も煩雑です。その煩雑さに対する住友ベークライトのソリューションが EZGlyco[™] mAb-N Kit with 2-AB です。本キットでは、抗体精製から糖鎖標識までを1チューブ内の操作で行うことができ、迅速（約2.5時間）かつ簡便な標識糖鎖の調製が可能です。キットには、N型糖鎖を遊離させるグリコシダーゼ（PNGase F）およびその酵素反応を短時間で完了させる住友ベークライト独自の反応促進剤、そして広く用いられている糖鎖標識である 2-アミノベンズアミドを同梱した便利なキットです。また標識反応には劇物シアン化合物を含みませんので、試薬管理など取扱いの面でも扱いやすいキットです。

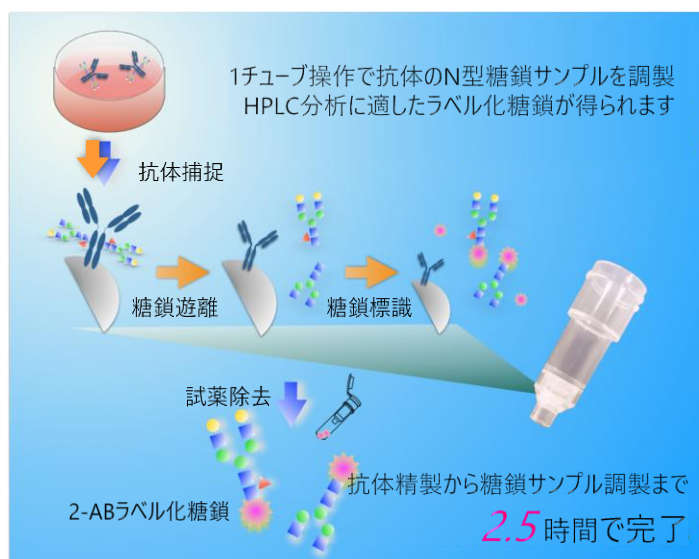

迅速


- 培養上清から**2.5時間**で完了

簡便

- 1チューブで反応完結
- 酵素、蛍光試薬同梱

安全

- **毒物不使用**
- 特別な操作は不要

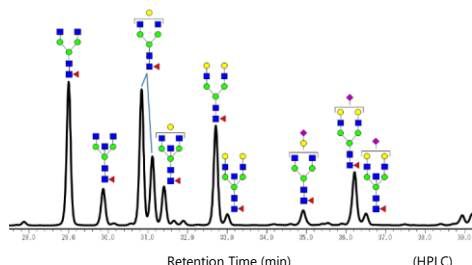

ヒト血清IgGのN型糖鎖プロファイリング例

◆ 製品情報

品 番	品 名	内 容	参考価格
BS-X4410	EZGlyco [®] mAb-N Kit with 2-AB	用途：抗体 (IgG) N型糖鎖のLC, LC-MS分析用サンプル調製 内容：抗体捕捉カラム、精製カラム、試薬類一式（10テスト分）	¥ 117,600 （税別）

- 糖鎖分析の全自動化オプションをご提案できます。詳細は住友ベークライトまでお問合せ下さい。

住友ベークライト株式会社

■ S-バイオ事業部
■ 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
■ Tel: 03-5462-4831 ■ E-mail: s-bio@sumibe.co.jp
■ Fax: 03-5462-4835 ■ URL : <http://www.sumibe.co.jp>

(販売店)