


WFI Quality Water

2023年春ごろ
上市予定!!

3極薬局方に規格適合した注射用蒸留水相当の水

- 本品はGMP管理で製造・品質管理致します。
- 製造フロー【富士フィルム和光純薬 国内工場にて製造】
原水にEDI（電気脱イオン処理）、RO（逆浸透膜）による処理を行った後、UF（限外濾過）膜にてUF水を製造し、その後蒸留工程を経て製品化します。

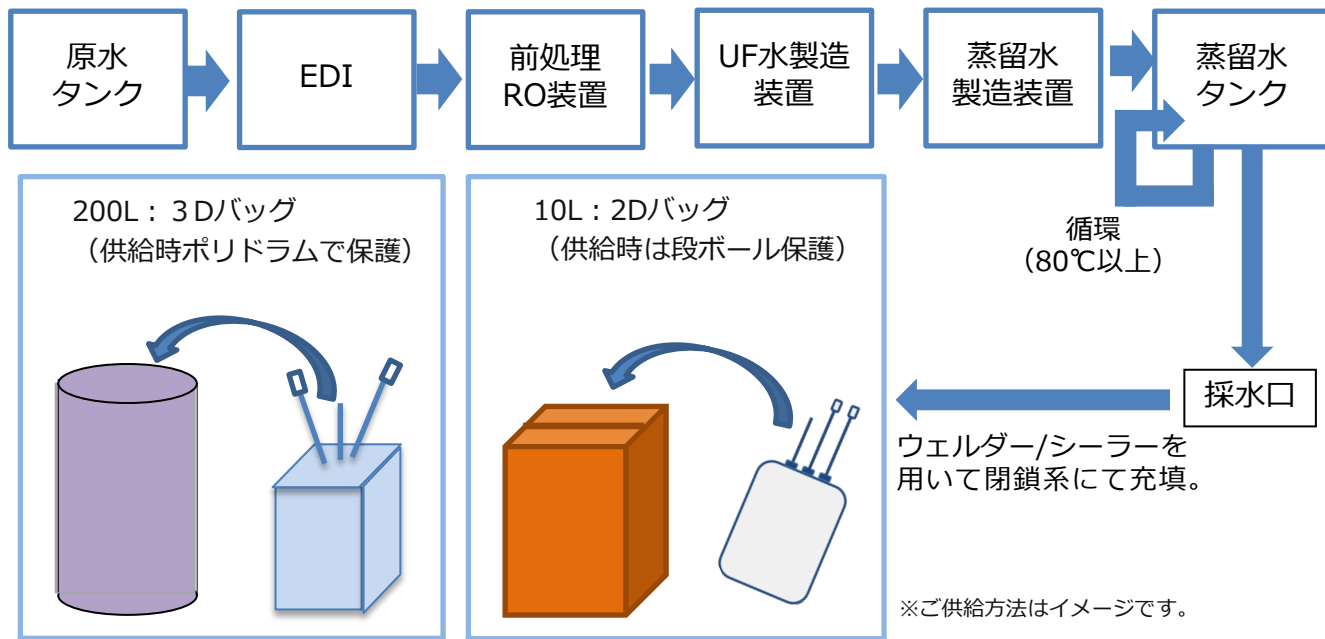

提供形態

10L、200Lなどの容量をラインナップ予定。
クリーンルーム内で閉鎖系で充填し、Ready to Useでご提供。
(上記イメージ)

規格項目

3極薬局方を満たす規格項目を設定予定。



関連サービス 受託調液サービス

当社では、バイオ医薬品製造プロセスで使用可能な溶液製品も製造しております。

当カタログでご紹介しているWFI Quality Waterを使用して特注調液することも可能です。

WFI Quality Waterで調液後、シングルユースバッグに充填することでReady to Useでご提供いたします。

カスタマイズ対応が可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。

バッグ充填含むカスタマイズ対応

下記の例のように、製品仕様（バッグのメーカーおよびチューブ、コネクタ等の包装仕様を含む）はお客様とご相談の上、決定いたします。

【カスタマイズ例】

- ・リン酸バッファをシングルユースバッグに充填しご提供。
- ・バッグへの充填時は、濾過滅菌（0.1 μ mフィルター）を実施した後、ウェルダール/シーラーを用いて完全閉鎖系にて充填。
- ・さらに無菌試験を実施し濾過滅菌による無菌性を担保。

項目	カスタマイズ例
調液用の水	パイロジェンフリー水 WFI Quality Water
容量	10L、20L、200L
試験項目	外観、pH、浸透圧、無菌試験、エンドトキシン、 マイコプラズマ、濃度、（フィルター完全性試験）
原料	CultureSure [®] シリーズ、CertiProシリーズ、 製造専用、薬添規



富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 ●横浜営業所
- 筑波営業所 ●東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099
フリーファックス 0120-052-806
試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com