

# Option

【オプション】

より効率的にご使用いただけるオプションやサポートの数々



## リスクアセスメント モジュール

使用量、使用時間、作業環境に応じてリスクレベルの判定が可能です。その結果に対応した対策シートを、システム上で共有できます。



## ハンディ モジュール

屋外倉庫などPCを設置できない場所でも、ハンディターミナルを利用して棚卸業務等を円滑に行えます。



## 発注 モジュール

カタログデータを利用して購入依頼から発注、納品までをサポートし、在庫登録の作業を軽減し、登録漏れを防ぎます。




## 鍵ボックス モジュール

PCと鍵ボックスを連動させ、鍵の持出返却や履歴を管理します。部署やユーザーごとに鍵の使用権限が設定可能です。



## 高圧ガス モジュール

ボンベ単位で在庫管理を行い、ガスの内容、場所、量を確認できます。

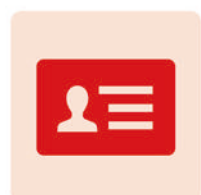

## ICカード ログインモジュール

ログインする際に、面倒なログインIDやパスワードの入力が不要に。社員証などのIDカードで簡単にログインが可能です。



## 個別カスタマイズに 対応可能

例えば業務運用に即した機能が欲しい、在庫データを移行して欲しいなど、お客様のあらゆるニーズにお応えしますので、ぜひ一度ご相談ください。



## 万全の 保守サポート

全国の販売代理店スタッフや弊社営業スタッフ、技術スタッフと連携して、お客様の業務をサポート致します。

### システム動作環境

サーバーOS	Windows Server 2016、Windows Server 2019 Windows 10、Windows 11
データベース	SQL Server 2016、2017、2019
他環境	AWS、Azure等のクラウド上での動作実績もございます。クラウドでの利用を検討されている方はぜひご相談ください。
クライアントOS	Windows 10、Windows 11、macOS
ブラウザ	Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari
周辺機器	電子天秤やラベルプリンタ等の周辺機器との連動は、Windowsのみサポートしております。

※最新情報につきましては担当営業から以下の窓口までお問い合わせください。

### 化合物や中間体の 管理をするなら CRAIS Reagent

自社化合物や中間体など化学構造式を利用して、より専門的な管理を行うなら、「CRAIS Reagent」をお勧めします。化合物の在庫や使用履歴の管理だけでなく、法規制チェックシステム「CRAIS Checker」などと連携し、構造式から法規制の判定を行うことも可能です。



化学物質安全管理支援システム

 **Chemical Design Ver.7**



より簡単に、スピーディーに。  
システムで化学物質管理を効率化。

株式会社インフォグラム  
**INFOGRAM**

#### ケミカルデザイン窓口

TEL: 092-452-2588 (直通)  
E-mail: cd\_contact@infogram.co.jp

#### 福岡本社

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17-19 安田第5ビル3F  
TEL: 092-452-2733 FAX: 092-452-2455

事務所: 北九州支社 / 東京営業所 / 伊万里開発センター

最新の情報はコチラまで > <https://www.infogram.co.jp/chemicaldesign/>



時短と安全性を叶える、管理に欠かせない機能がこれひとつ。

## Chemical Design Ver.7

どんなに高性能でも、使い勝手が悪ければ利用される方の負担になります。毎日の業務で使うシステムであればなおさらです。弊社の化学物質管理システムは、見やすさ・使いやすさでもご好評いただき、導入実績は300以上。簡単操作で効率アップに貢献します。

限られた時間で成果が求められる、研究の現場。時間のロスは避けたいものです。しかし、化学物質の管理は常に細心の注意が必要。ミスが許されないからこそ、Chemical Design Ver.7のスピーディーさと確実性が力を発揮。タイムマネジメントをサポートします。



分野や機関によって研究は多岐にわたります。Chemical Design Ver.7の特徴は、使う方に合わせた活用ができること。使いやすさを基準にした多彩な先進機能を搭載し、オプションもご用意。これまで大変だった化学物質管理のストレスを、グンと軽減します。

20年の経験と、300以上の導入実績から、最適なプランをご提案します。

大学・官公庁・民間企業など  
長年にわたり培ってきたノウハウでお応えします。  
例えば社内にサーバーを設置したくない場合など、AWSやAzureといったクラウド上のサーバーにシステムを構築することも可能です。  
何なりとご要望をお聞かせください。



Easy

全ての機能がウェブブラウザ上から使える、シンプルなインターフェイスで操作も簡単。

シンプルで直感的に操作できるインターフェイスだから、作業負担が軽減し効率もアップ。さらに、機能面ではお客様の運用に合わせた使い方ができます。多くの導入事例の中から最適なものをご提案。特別な運用の場合もカスタマイズで柔軟に対応いたします。



Speedy

面倒だった管理者業務がグンと軽減！  
あらゆる管理をスピーディーにサポートします。



**法規制管理**  
PRTR集計や消防法指定数量の計算、法令更新時のメンテナンスなど、法規制の管理が可能です。

**利用者管理**  
利用者ごとに権限を割り当て、それぞれに利用可能な機能を設定できます。

**在庫管理**  
「どこにどんな薬品があるか」を簡単に把握できるので、無駄な在庫を削減できます。







「こんな機能が欲しかった！」使う人の身になって開発された、多彩な先進機能。



**在庫登録**

試薬の登録も、カタログデータや今までに登録した履歴データを用いて、グッと簡単に。また、登録する試薬の該当法令によって管理方法(使用量・本数)の設定も可能です。



**バーコード発行**

容器ごとにシステムで割り振ったIDを、バーコードシールで発行してより管理しやすく。専用のラベルプリンタなら、耐薬品性のシールを発行することもできます。小さな容器用には、QRコードの発行も可能です。



**使用量入力**

常に注意が必要な毒劇物などの使用量の記録が可能です。電子天秤と連動することで、簡単に使用量を入力。いつ、誰が、どの薬品をどれだけ使用したか履歴管理がしやすくなります。



**廃棄機能**

使い切った薬品や、有効期限が切れた古い不要試薬を廃棄することができます。また、使い切れず廃棄する薬品は廃棄量として集計することが可能です。



**棚卸機能**

面倒な在庫の棚卸もラクラク。各保管庫毎に、システム上の在庫情報と実際の在庫情報を比較し、調査できます。またハンディターミナルを使えば、より効率的な棚卸が可能です。



**在庫検索**

試薬の在庫データの検索も、様々な条件を組み合わせるので効率的。検索結果は画面だけでなく、CSV形式で出力も可能です。また、検索結果に対して一括で保管場所変更や廃棄処理等も行えます。



**カタログ検索**

検索の効率アップ! 事前にシステムに取り込んだ各試薬メーカー提供のカタログデータやSDS、今までシステムに登録された事のある試薬データを様々な条件で検索できます。



**小分け機能**

一斗缶、ガロン瓶の試薬を別容器に移し替えて使用する場合は、この機能が役立ちます。小分け元と小分け先の容器ID、小分け量を入力するだけで、別容器として在庫登録できます。



**管理機能**

試薬の各種履歴だけでなく、登録情報の変更履歴も画面上で確認可能です。さらにデータをCSV形式やPDF形式で出力できますので、報告書を作成するときの負担も一気に軽減できます。



**権限機能**

管理者側の利便性も向上させました。システム内の各機能に対する使用権限について、利用者ごとの設定が可能です。




これまでにご要望いただいた機能を搭載し、さらに便利に!



**簡単ログイン**

IDやパスワードの入力を省き、ICカードで簡単にログインできるようになりました。よりスピーディーに、システムへアクセスできます。(オプション)

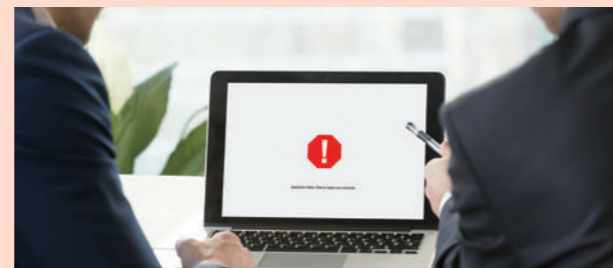

**有効期限の管理を強化**

有効期限が切れた薬品を使用しようとした際に、アラートが表示されるようになりました。期限切れ薬品の誤使用を防止します。



**簡単集計**

試薬ごと、商品ごと、容器ごとの入手量、使用量、廃棄量の集計が可能。結果は、画面とCSVファイルで確認いただけます。集計作業が簡単になり、効率アップ。



**スピーディーな棚卸**

棚卸をする際に、システム内の容器の状態を確認できます。棚卸の実施を妨げる原因が確認でき、スムーズに棚卸が行えます。