

多重包装・滅菌済・クリーンルーム用モップクロス

モップクロス

用途

- クリーンエリアの床清掃に
- こぼれた液体の拭き取りに



※2重包装状態

モップクロスの特長

- 特長 1** 滅菌保証レベルSAL10⁻⁶で放射線滅菌済みです。
(照射証明書を発行できます。)
- 特長 2** 3重包装、最内袋は電子線耐性素材の密封パック滅菌状態を長期間保ちます。
〔上位の清浄グレードに持ち込む毎に外袋を取り去ることで、無菌エリアへの菌・ウイルス・塵等の持ち込みを最小限に抑えます。〕
- 特長 3** 最小包装単位が10枚使いきりサイズ。
使用直前まで滅菌がバリデートされた状態を保てます。
- 特長 4** ディスインフェクター等の一般的な薬剤塗布器にお使い頂けます。

モップクロスの使い方



外袋を取り除いて上の清浄グレードへ持ち込みます。 → 使用直前に包装を破いて1枚ずつ取り出します。 → 市販の薬剤塗布器のマジックテープに簡単に装着できます。 → 薬剤を素早く吸収し、滑りやすくスムーズに塗布できます。 → 使用後は足で抑えて簡単に取り外せます。

注文情報

製品コード	品名	サイズ	入数	包装
PB4001	モップクロス	約 15.5x32 (cm)	80 枚 / 箱	10枚×2袋×4袋×1袋

※表示価格に消費税は含まれておりません。
※本カタログに記載の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ニッタ株式会社

クリーンエンジニアリング事業部

<https://www.nitta.co.jp>


大阪本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-26
TEL.06-6563-1233 FAX.06-6563-1234

奈良工場 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172
TEL.0743-56-9400 FAX.0743-56-4403



クリーンルーム用清掃用具 ステリワイパーシリーズ モップクロス

多重包装・滅菌済み

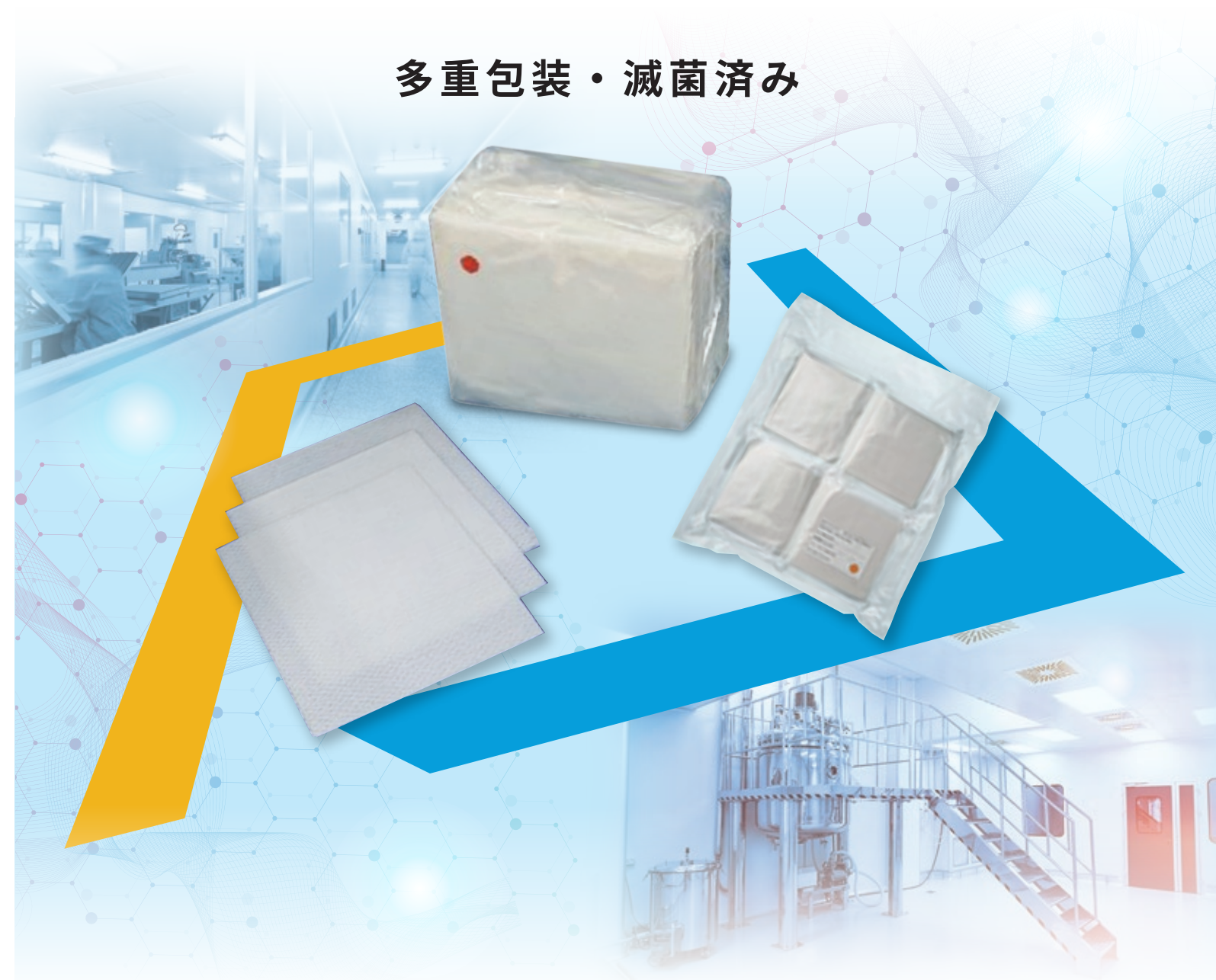

ニッタ株式会社

「チェンジオーバーガイドライン※」の拭き上げ、清拭に対応したラインナップ



※2019/12
再生医療等製品（遺伝子治療用製品を除く）の製造における
チェンジオーバーに関するガイドライン

多重包装・滅菌済・クリーンルーム用ワイパー

ステリワイパーシリーズ



ステリワイパーシリーズの特長

- 特長 1** 滅菌保証レベルSAL10⁻⁶で放射線滅菌済みです。
(照射証明書を発行できます。)
- 特長 2** 3重包装、最内袋は電子線耐性素材の密封パック滅菌状態を長期間保ちます。
[上位の清浄グレードに持ち込む毎に外袋を取り去ることで、無菌エリアへの菌・ウイルス・塵等の持ち込みを最小限に抑えます。]
- 特長 3** 最小包装単位が5枚～25枚使いきりサイズ。
使用直前まで滅菌がバリデートされた状態を保てます。

用途

- クリーンエリアの除染作業に
- こぼれた液体の拭き取りに
- 外部から持ち込む器具・検体容器の拭き取りに



クリーンエリアの日常の除染、こぼれた液体の拭き取りに



クリーンルームへ持ち込む器具の拭き取りに




外袋を取り除いて上の清浄グレードへ持ち込めます

ステリワイパー、ステリワイパーワイドの原材料

ベンリーゼ※の優れた特性

※「ベンリーゼ」は旭化成株式会社の登録商標です。

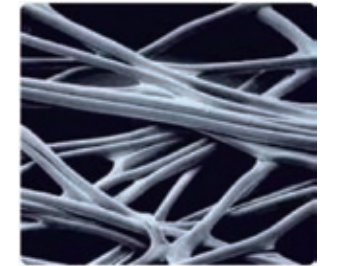

コットンが原料だから

- ✓ 抜群の吸液性(自重の13倍)と保液性
- ✓ 繊維自体が11%の水分を含むので静電気の発生が少ない。
- ✓ 耐熱性 合成繊維のように150℃位で融解することがありません。


連続長繊維(エンドレス)だから

- ✓ 脱落繊維が少なく、マイクロリントの発生も最低限
- ✓ 実際の使用状況に近いウエット状態のマイクロリントの測定でも優れた特性を示しています。


添加剤・油剤を使用しないから

- ✓ 有機溶剤などで溶出する成分がありません。
- ✓ シリコンウエハを用いた拭き取り後の残留物の検査でも好成績
- ✓ 一部の不織布のように接着剤によって繊維を結合しないため、使用する溶剤によって繊維が脱落しやすくなることはありません。

〈ステリワイパー〉

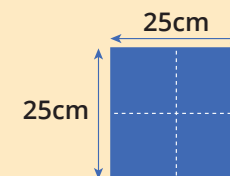

〈ステリワイパーワイド〉

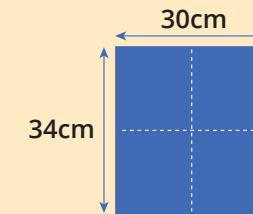

ステリワイパーワイド **ポイント!**


- ✓ ステリワイパーの面積比1.7倍サイズ
- ✓ 使用時に手のひらでしっかり押さえられるようサイズアップ
- ✓ ステリワイパーより丈夫で肉厚なつくり

ステリワイパーフィニッシャー

リント発生を極限まで抑え、グレードAエリアの清拭に特化したワイパー

汚れを取りきるきめ細かさ

- ✓ ポリエステル、ナイロンで汚れを保持。
- ✓ 拭き上げ後の最終仕上げ「清拭」で汚れを取りきる。
- ✓ 有機溶出物はもちろんイオン溶出も発生しない。
- ✓ 製造後に洗浄工程を設けて塵・埃は極限まで除去

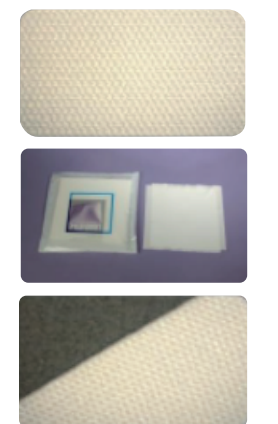

注文情報

製品コード	品名	入数	包装
PB6001	ステリワイパー (25cm×25cm 4折)	1,000 枚/箱	25枚×4袋×10袋×1袋
PB6002	ステリワイパーワイド (約 34cm×30cm 4折)	960 枚/箱	20枚×4袋×12袋×1袋
PB6003	ステリワイパーフィニッシャー (約 23cm×23cm)	100 枚/箱	5枚×5袋×4袋