

L-アルギニン測定キット



内 容

試薬 A 液：30 mL
試薬 B 液：30 mL
標準液 (100 mg/L)：1.5 mL

測定回数

60 回

使用目的

試料中の L-アルギニン含有量の測定


保存条件 冷蔵 (2-8℃)

販売価格 77,000 円 (税込・送料別)



使用期限 箱側面に記載

測定原理

Step1：A 液中の酵素により、試料中に共存するアスコルビン酸の L-アルギニン測定値への影響を排除する。

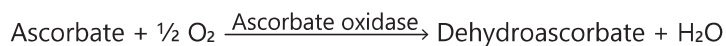

Step2：B 液中の酵素により、L-アルギニンから化学量論的に一定の割合で色素が生成する。

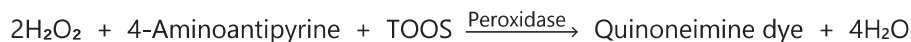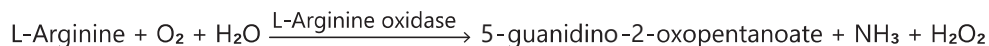


試料および標準液

- ・ 試料は、L-アルギニンがおおよそ 20 ～ 300 mg/L の範囲となるよう調製する。
- ・ 標準液は、キットに付属している L-アルギニン標準液 (100 mg/L) をそのまま使用する。

測定手順（当社 LED 比色計を使用した場合）

- (1) 水、標準液及び試料をそれぞれ 0.05 mL ずつディスポセルに入れ、各セルに A 液 0.5 mL を添加し軽く振り混ぜ室温で 10 分間静置する。(Step1)
- (2) B 液 0.5 mL を添加し軽く振り混ぜ、室温で 20 分間静置する。(Step2)
- (3) 試薬ブランク*と標準液の発色液で校正した LED 比色計で、試料の L-アルギニン濃度を測定する。


* 試薬ブランクとは、水 0.05 mL + A 液 0.5 mL + B 液 0.5 mL のこと。

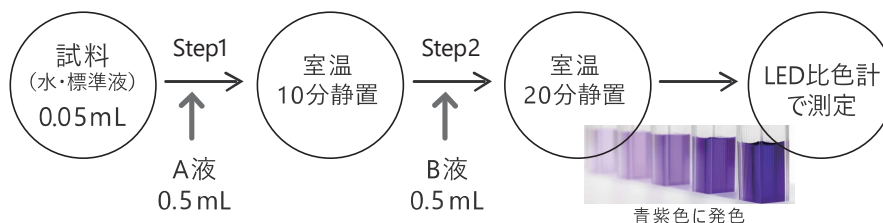


注意事項

1. 試薬は冷蔵庫 (2-8℃) で保管してください。
2. 測定する際は、試薬を室温に戻してから使用してください。試薬が冷たいまま使用しないでください。
3. 本測定法はエンドポイント法ですが、B 液添加後の時間 (20 分) を正確に管理することで、より精度の高い測定が可能です。
4. アスコルビン酸 (ビタミン C) 以外の強い還元性物質を多量に含む試料は測定できません。


タイムコース

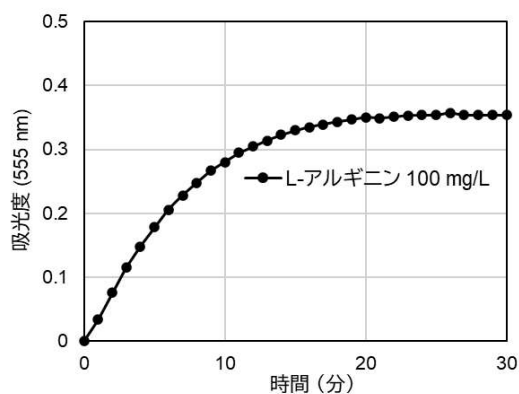


検量線

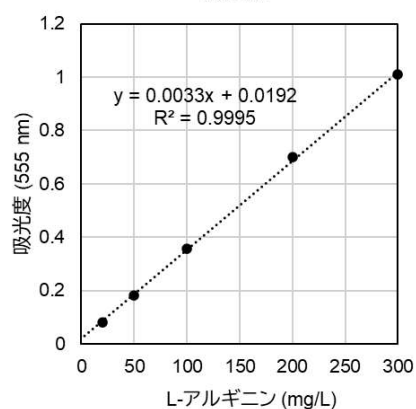

特異性

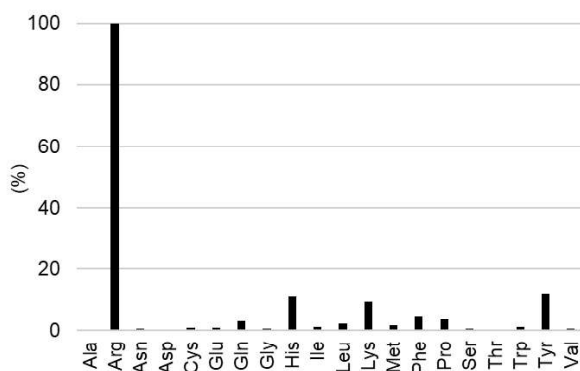

日本酒のL-アルギニン測定
(HPLCとの相関)

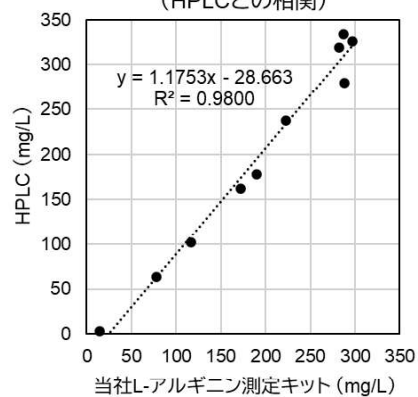

L-アルギニン簡易測定セット「アルギニン ミエール」

測定キット、LED 比色計、測定に必要な小器具を収めたセット製品

セット内容

L-アルギニン測定キット 1 箱、LED 比色計 1 台、付属品一式

【付属品内容】 試料採取用ピペット&チップ・試薬 A 液及び試薬 B 液採取用シリンジ
予備シリンジ・希釈管・水採取用スポイト・セル・セル立て

販売価格

110,000 円(税込・送料別)



◀お問い合わせ・ご購入はこちら

ホームページのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

<https://enzyme-sensor.net>

株式会社エンザイム・センサ

ENZYME
SENSOR