



住友ベークライト株式会社 培養器材 安定供給再開キャンペーン

品切れにより納期を要しておりましたが、安定供給を再開いたしました！

お客様への感謝の気持ちを込めてマイクロプレートなど最大**45%OFF**にてご提供させていただきます。

キャンペーン期間

2023年7月1日～2023年9月29日

住友ベークライト株式会社



「SUMILON®」ブランドとして細胞培養器材を中心としたプレート、フラスコ、遠沈管など幅広い製品を取り揃えております。
国内で生産・品質管理を行っておりますので、安心してご使用いただけます。

富士フイルム 和光純薬株式会社

細胞培養用マルチプレート

NON Pyrogenic

放射線滅菌済



- プレートのサイズが統一されており、安定して積み重ねることができます。
- 独立ウェル構造により、外周ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。

■ 接着細胞培養用

接着細胞用に表面を物理的親水処理することで、細胞の初期接着性、増殖性に優れています。

接着細胞培養用は透明タイプに加え、発光測定用の白色プレート、蛍光測定用の黒色プレートをラインアップしています。

コードNo.	メーカーコード	品 名	ウェル底形状	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
632-28401	MS-80060	6ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付	平底	1枚/包	50枚	22,000	12,100
636-28421	MS-80120	12ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付				23,600	12,980
630-28441	MS-80240	24ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付				27,200	14,960
634-28461	MS-80480	48ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付				29,000	15,950
638-28481	MS-8096F	96ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付			60枚	29,100	16,000
632-28521	MS-8196F5	96ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付		5枚/包	50枚	24,100	13,260
631-27371	MS-3096F	96ウェルマルチプレート フタ付		1枚/包	60枚	31,800	17,490
638-27381	MS-3096U	96ウェルマルチプレート フタ付	U底			31,200	17,160
635-28511	MS-8096W	発光測定用96ウェル 白色プレートフタ付	平底	5枚/包	50枚	36,200	23,530
635-28491	MS-8096K	蛍光測定用96ウェル 黒色プレートフタ付				36,200	23,530

■ 浮遊細胞培養用

細胞が接着しにくいプレートで、細胞の回収時における細胞へのダメージや損失を最小限に抑えます。
ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養などに有効です。

コードNo.	メーカーコード	品 名	ウェル底形状	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
639-28411	MS-8006R	6ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付	平底	1枚/包	50枚	22,000	12,100
633-28431	MS-8012R	12ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付				23,600	12,980
637-28451	MS-8024R	24ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付				27,200	14,960
631-28471	MS-8048R	48ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付				29,000	15,950
638-28501	MS-8096R	96ウェルマルチプレート 独立ウェル、フタ付			60枚	29,100	16,000
635-27391	MS-309UR	96ウェルマルチプレート フタ付	U底			31,200	17,160

細胞培養用フラスコ

NON Pyrogenic

放射線滅菌済



- ・口広設計で、ピペッティングやセルスクレーパー操作が容易です。
- ・培養面は均一性・平滑性に優れているので顕微鏡観察時にクリアな視界が得られます。
- ・フィルターキャップタイプには疎水性フィルターを使用しており水分は吸収せず、真菌、細菌のフラスコ内への侵入を防ぎます。

■ 接着細胞培養用

表面を物理的親水処理しているため、細胞の初期接着性、増殖性に優れています。

コードNo.	メーカーコード	品 名	容量	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
633-27191	MS-21050	25cm ² フラスコ	50mL	10個/包	200個	44,600	24,530
633-27211	MS-21250	75cm ² フラスコ	250mL	5個/包	60個	21,600	11,880
639-27171	MS-20600	150cm ² フラスコ	600mL	3個/包	30個	26,100	14,360
637-27231	MS-21800	225cm ² フラスコ	800mL		18個	17,100	9,400
631-27251	MS-23050	25cm ² フィルターキャップフラスコ	50mL	10個/包	200個	59,800	32,890
635-27271	MS-23250	75cm ² フィルターキャップフラスコ	250mL	5個/包	60個	27,300	15,020
639-27291	MS-23600	150cm ² フィルターキャップフラスコ	600mL	3個/包	30個	28,800	15,840
639-27311	MS-23800	225cm ² フィルターキャップフラスコ	800mL		18個	18,900	10,400

■ 浮遊細胞培養用

細胞が接着しにくいフラスコで、ハイブリドーマやリンパ球の培養などに有効です。

コードNo.	メーカーコード	品 名	容量	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
636-27201	MS-2105R	25cm ² フラスコ	50mL	10個/包	200個	44,600	24,530
630-27221	MS-2125R	75cm ² フラスコ	250mL	5個/包	60個	21,600	11,880
636-27181	MS-2060R	150cm ² フラスコ	600mL	3個/包	30個	26,100	14,360
634-27241	MS-2180R	225cm ² フラスコ	800mL		18個	17,100	9,400
638-27261	MS-2305R	25cm ² フィルターキャップフラスコ	50mL	10個/包	200個	59,800	32,890
632-27281	MS-2325R	75cm ² フィルターキャップフラスコ	250mL	5個/包	60個	27,300	15,020
632-27301	MS-2360R	150cm ² フィルターキャップフラスコ	600mL	3個/包	30個	28,800	15,840
636-27321	MS-2380R	225cm ² フィルターキャップフラスコ	800mL		18個	18,900	10,400

セラムチューブ

NON Pyrogenic

放射線滅菌済



- 溶出物の少ないポリプロピレン製で、口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。
- アウターキャップタイプ、インナーキャップタイプに加え、高速遠心が可能なスリムチューブもご用意しております。
- 気密性に優れており、IATA危険物規則書に準拠しています。リークテスト済です。
(試験内容：-45℃～55℃、内圧差95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)
- オートクレーブ(121℃、20分)や液体窒素での保存も可能です。

※詳しくはHP (<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/01908.html>)「セラムチューブ使用上の注意事項」をご確認ください。

	アウターキャップ	スリムチューブ	インナーキャップ
			
容量	1mL、2mL、4mL、5mL	0.5mL、1.5mL	1.2mL、2mL、4mL、5mL
キャップ色	白、赤、黄、青、緑、MIX(5色詰)		

■ アウターキャップ

キャップ内の内側にシリコンパッキンがついており、高い気密性が乾燥、液漏れを防ぎます。

コードNo.	メーカーコード	キャップ色	本体形状	包装	入数	希望納入価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
セラムチューブ（アウターキャップ） 1 mL							
630-27841	MS-4601B	青	自立型	50個/包	500個	38,000	22,800
637-27851	MS-4601G	緑				38,000	22,800
634-27861	MS-4601R	赤				38,000	22,800
631-27871	MS-4601W	白				38,000	22,800
635-27891	MS-4601Y	黄				38,000	22,800
638-27881	MS-4601X	5色詰				38,000	22,800
セラムチューブ（アウターキャップ） 2 mL							
638-27901	MS-4603B	青	自立型	50個/包	500個	38,000	22,800
635-27911	MS-4603G	緑				38,000	22,800
632-27921	MS-4603R	赤				38,000	22,800
639-27931	MS-4603W	白				38,000	22,800
633-27951	MS-4603Y	黄				38,000	22,800
636-27941	MS-4603X	5色詰				38,000	22,800
セラムチューブ（アウターキャップ） 4 mL							
630-27961	MS-4604B	青	自立型	50個/包	300個	24,300	14,580
637-27971	MS-4604G	緑				24,300	14,580
634-27981	MS-4604R	赤				24,300	14,580
631-27991	MS-4604W	白				24,300	14,580
635-28011	MS-4604Y	黄				24,300	14,580
638-28001	MS-4604X	5色詰				24,300	14,580
セラムチューブ（アウターキャップ） 5 mL							
632-28021	MS-4605B	青	自立型	50個/包	300個	24,300	14,580
639-28031	MS-4605G	緑				24,300	14,580
636-28041	MS-4605R	赤				24,300	14,580
633-28051	MS-4605W	白				24,300	14,580
637-28071	MS-4605Y	黄				24,300	14,580
630-28061	MS-4605X	5色詰				24,300	14,580

■ スリムチューブ

キャップ内の内側にシリコンパッキンがついており、高い気密性が乾燥、液漏れを防ぎます。

19,500Gの耐遠心強度があり、高速遠心が可能です。1本で遠心分離と凍結融解が行えますのでコンタミの心配がありません。

コードNo.	メーカーコード	キャップ色	本体形状	包装	入数	希望納入価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
スリムチューブ 0.5mL							
636-31611	MS-4701B	青	自立型	50個/包	500個	38,000	22,800
633-31621	MS-4701G	緑				38,000	22,800
630-31631	MS-4701R	赤				38,000	22,800
637-31641	MS-4701W	白				38,000	22,800
634-31651	MS-4701Y	黄				38,000	22,800
634-28081	MS-4701X	5色詰				38,000	22,800
スリムチューブ 1.5mL							
631-31661	MS-4702B	青	自立型	50個/包	500個	38,000	22,800
638-31671	MS-4702G	緑				38,000	22,800
635-31681	MS-4702R	赤				38,000	22,800
632-31691	MS-4702W	白				38,000	22,800
635-31701	MS-4702Y	黄				38,000	22,800
631-28091	MS-4702X	5色詰				38,000	22,800

■ インナーキャップ
キャップにはリング状のシリコンパッキンがついております。

コードNo.	メーカーコード	キャップ色	本体形状	包装	入数	希望納入価格 (円)	キャンペーン価格 (円)
セラムチューブ（インナーキャップ） 1.2mL							
632-27541	MS-4501B	青	自立型	50個/包	500個	36,500	21,900
639-27551	MS-4501G	緑				36,500	21,900
636-27561	MS-4501R	赤				36,500	21,900
633-27571	MS-4501W	白				36,500	21,900
637-27591	MS-4501Y	黄				36,500	21,900
630-27581	MS-4501X	5色詰				36,500	21,900
セラムチューブ（インナーキャップ） 2mL							
630-27601	MS-4502B	青	丸底型	50個/包	500個	36,500	21,900
637-27611	MS-4502G	緑				36,500	21,900
634-27621	MS-4502R	赤				36,500	21,900
631-27631	MS-4502W	白				36,500	21,900
635-27651	MS-4502Y	黄				36,500	21,900
638-27641	MS-4502X	5色詰				36,500	21,900
632-27661	MS-4503B	青	自立型			38,000	22,800
639-27671	MS-4503G	緑				38,000	22,800
636-27681	MS-4503R	赤				38,000	22,800
633-27691	MS-4503W	白				38,000	22,800
633-27711	MS-4503Y	黄				38,000	22,800
636-27701	MS-4503X	5色詰				38,000	22,800
セラムチューブ（インナーキャップ） 4mL							
630-27721	MS-4504B	青	丸底型	50個/包	300個	23,700	14,220
637-27731	MS-4504G	緑				23,700	14,220
634-27741	MS-4504R	赤				23,700	14,220
631-27751	MS-4504W	白				23,700	14,220
635-27771	MS-4504Y	黄				23,700	14,220
638-27761	MS-4504X	5色詰				23,700	14,220
セラムチューブ（インナーキャップ） 5mL							
632-27781	MS-4505B	青	丸底型	50個/包	300個	23,700	14,220
639-27791	MS-4505G	緑				23,700	14,220
632-27801	MS-4505R	赤				23,700	14,220
639-27811	MS-4505W	白				23,700	14,220
633-27831	MS-4505Y	黄				23,700	14,220
636-27821	MS-4505X	5色詰				23,700	14,220

ディスポーザブルピペット

NON Pyrogenic 放射線滅菌済

- ・ 全数リークテストを実施し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
- ・ プラスチックフィルム一体包装のため、分別廃棄の必要がありません。
また、静電気によるまとわりつきがほとんどありません。
- ・ 個包装をさらにチャック付包装で二重に包装していますので、一部保管や
クリーンエリアへの持ち込みに便利です。



■ ディスポーザブルピペット
透明なボディとクリアな印刷で目盛の判読が容易です。

コードNo.	メーカーコード	品 名	最小目盛	カラーコード	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
638-28241	MS-66020	2mLピペット	0.05mL	透明	200本	27,000	14,850
635-28251	MS-66050	5mLピペット	0.1mL	青		21,200	11,660
639-28271	MS-66100	10mLピペット		橙		22,200	12,210
633-28291	MS-66250	25mLピペット	0.2mL	赤		31,000	17,050

■ ディスポーザブルピペット（ショートタイプ）
クリーンベンチ内など限られたスペースでのハンドリングが容易です。

コードNo.	メーカーコード	品 名	最小目盛	カラーコード	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
632-28261	MS-66052	5mLピペット（ショートタイプ）	0.1mL	青	200本	21,200	11,660
636-28281	MS-66102	10mLピペット（ショートタイプ）		橙		22,200	12,210
636-28301	MS-66252	25mLピペット（ショートタイプ）	0.2mL	赤		31,000	17,050

遠沈管

- 細胞毒性試験、発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。
- オートクレーブ可能(121℃、20分)です。
- 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、検体の判別等のラベリングに便利です。



■ PP製半透明タイプ遠沈管（緑キャップ）

ポリプロピレン製ですべて放射線滅菌済です。

-80℃での凍結保存も可能です。

※凍結方法によってはチューブにヒビが入る恐れがあります。液量を半分以下にするなどしてください。

遠心強度試験(参考値)：15mL遠沈管 15,000G、50mL遠沈管 20,000G

NON Pyrogenic

放射線滅菌済

コードNo.	メーカーコード	品名	サイズ	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
638-28121	MS-56150	15mL遠沈管	外径19(Φ)×118(L)	5本/包	400本	28,000	15,400
635-28131	MS-56151	15mL遠沈管		25本/包		28,000	15,400
639-28151	MS-56500	50mL遠沈管	外径30(Φ)×115(L)	5本/包	300本	27,000	14,850
636-28161	MS-56501	50mL遠沈管		25本/包		27,000	14,850

■ TPX製透明タイプ遠沈管（赤キャップ）

耐有機溶媒性があるポリメチルペンテル(TPX) 製ですべてEOG滅菌済です。

透明な材質ですので、フェノール/クロロホルム抽出時に便利です。

遠心強度試験(参考値)：15mL遠沈管 3,000G、50mL遠沈管 3,000G

NON Pyrogenic

EOG滅菌済

コードNo.	メーカーコード	品名	サイズ	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
633-28171	MS-57150	15mL遠沈管	外径19(Φ)×118(L)	5本/包	400本	45,200	24,860
630-28181	MS-57500	50mL遠沈管	外径30(Φ)×115(L)		300本	39,600	21,780

低吸着関連製品

放射線滅菌済

■ プロテオセーブ®SS・ステムフル®

- 細胞やタンパク質などの容器への吸着を抑制します。
- 幹細胞などの吸着性の高い細胞の回収に大きな効果を発揮します。
- プロテオセーブ®SS、ステムフル® 遠沈管は材質が異なりますが、同じ表面処理（超親水性ポリマーコーティング）をほどこしております。





コードNo.	メーカーコード	品名	材質	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)
638-27521	MS-4255M	プロテオセーブ®SS マイクロチューブ 0.5mL	PP	100本/包	500本	26,000	22,100
635-27531	MS-4265M	プロテオセーブ®SS マイクロチューブ 1.5mL				23,000	19,550
633-37341	MS-4270M	プロテオセーブ®SS マイクロチューブ 2.0mL				29,000	24,650
637-28691	MS-90150	ステムフル® 遠沈管 15mL	本体：PET 蓋：PE	5本/包	100本	33,400	28,390
631-28111	MS-52550	プロテオセーブ®SS 遠沈管 50mL	本体：PP 蓋：PE			31,100	26,440

PP：ポリプロピレン、PET：ポリエチレンテレフタレート、PE：ポリエチレン

PrimeSurface®

PrimeSurface®は超親水処理により、細胞の接着が抑えられます。
幹細胞の分化・誘導、3次元モデルによる薬効試験・創薬スクリーニングに最適です。

- ウェル内面への細胞低吸着表面処理と特殊なウェル底形状により、細胞を播種するだけで1ウェルに1個の均一な凝集塊が得られます。
- がん幹細胞を含む多くのがん研究に関する論文での使用実績が豊富です。

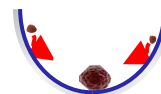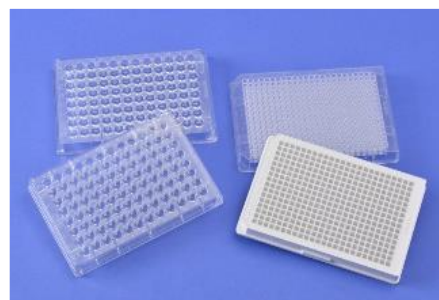

PrimeSurface® V底プレートを使用したiPS細胞からのオルガノイド作製



iPS細胞のスフェロイド形成にはV底プレートが最適です。大きさが均一なスフェロイドが1ウェルに1個形成されるので、効率のよい分化誘導を行うことができます。

播種数: 1×10^4 cells/well



Scale bar: 500 μ m

【データ提供】
関西医科大学 医学部 iPS・幹細胞応用医学講座
教授 六車恵子先生


【小脳】

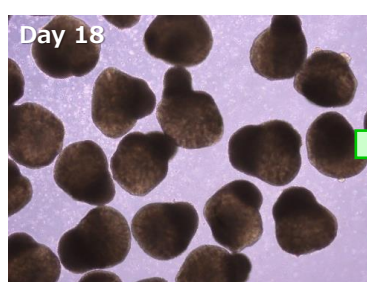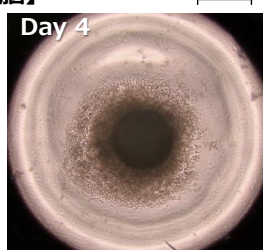

【大脳】

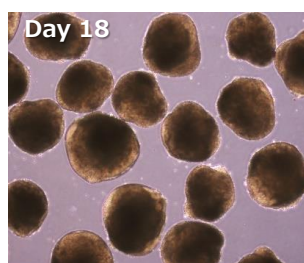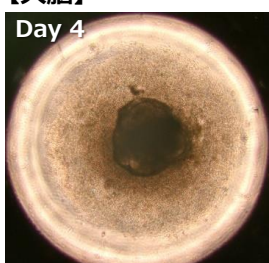

【網膜】

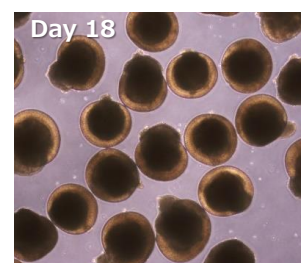

PrimeSurface® U底プレートを使用した他社比較データ


均一なスフェロイドを作製でき、再現性の高いデータが取得可能です。

【細胞株】 HepG2
【播種数】 1000 cells/well

【培地】 DMEM+10%FBS 培養期間: 3日間
【使用プレート】 各社96well U底プレート


判断基準: 顕微鏡観察結果を以下の4つのグレードに分類

<グレードA>

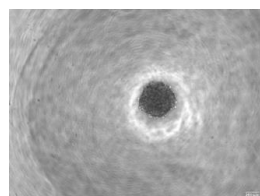


1ウェルに1個だけスフェロイドが形成した場合

<グレードB>

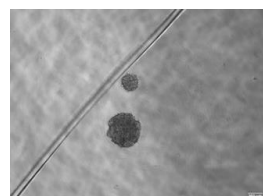


大きなスフェロイドと1個の小さなスフェロイドが形成した場合

<グレードC>

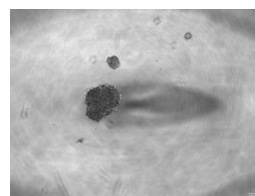

3個以上のスフェロイドが形成した場合や歪な形を形成した場合

<グレードD>

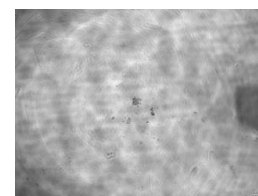

スフェロイドが形成できなかった場合

【集計結果】

メーカー	製品名	グレードA	グレードB	グレードC	グレードD
A社 (海外)	A製品	23	3	70	0
B社 (海外)	B製品	65	27	4	0
C社 (海外)	C製品	83	8	5	0
D社 (海外)	D製品	88	6	1	1
E社 (国内)	E製品	95	1	0	0
住友ベークライト	PrimeSurface®	96	0	0	0

※ここで用いられておりますデータはすべて住友ベークライト社で実施された測定の一例で、保証値ではありません。また、あらゆる条件下での性能を保証するものではありません。

アンケート回答のお客様限定！キャンペーン

下記アンケートに回答いただいたお客様限定！PrimeSurface®（一部）をキャンペーン価格にてお届けいたします！！

STEP1 ご希望の製品の「数量」列に数を記入してください。

コードNo.	メーカーコード	品 名	ウェル底形状	包装	入数	希望納入価格(円)	キャンペーン価格(円)	数量
634-37511	MS-9096S	PrimeSurface® 96スリットウェルプレート	紡錘底	1枚/包	20枚	103,500	93,150	
631-21031	MS-9096U	PrimeSurface® 96Uウェルプレート	U底			34,600	27,680	
625-01091	MS-9096V	PrimeSurface® 96Vウェルプレート	V底			57,600	51,840	

STEP2 どのような細胞の凝集塊作成に使用されますか。

[]

STEP3 住友ベークライト以外で使用されている培養器材はありますか。(複数選択可)

- ☐ Corning ☐ AGCテクノグラス ☐ Thermo ☐ グライナー
☐ その他 []

STEP4 培養器材を選ぶ理由を教えてください。(複数選択可)

- ☐ 納期 ☐ 価格 ☐ 品質 ☐ 国産 ☐ 口コミ
☐ その他 []

STEP5 ご要望などございましたらご記入ください。

[]

お客様の情報をご記入ください。

所属			
氏名		販売代理店	
E-mail		TEL	

アンケート用紙のコピーあるいはpdfを当社営業もしくは販売代理店へお渡しください。

- 本パンフレットに掲載している製品は、試験・研究の目的にのみご使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 価格には別途消費税がかかります。希望納入価格は2023年6月現在の情報です。予告なく変更する場合がございますので予めご少量ください。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の販売代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>