

ステンレス容器



科学機器カタログ



since 1932

CATALOG

株式会社スギヤマゲン

1 真空保管容器

キミツ	
キミツ	2
キミツ関連製品	
パッキン	3
バリアカット	3
三方バルブ	3
ゲージ	3
キャスター	3
キミツ特殊仕様品	
吸引ろ過缶	4
ガラス窓付き減圧容器	5
キミツ特注対応品	5

2 ステンレス容器・特注仕様品

加圧保管容器	6
ヘルールボトル	6
プラントアタッチメント	7

3 有機溶媒安全保管容器

そるべん缶 [®]	
そるべん缶 [®]	8
ラボ缶	
ラボ缶 R	9
そるべん缶・ラボ缶 関連製品	
カンラック	10
バルブ	10

4 恒温水槽

バスツール	11
-------	----

5 フタ付ステンレス容器

フタ付ストレート缶	
フタ付ストレート缶	12
フタ付テーパー缶	
フタ付テーパー缶	14

6 チタン容器

チタン容器	16
-------	----

索引（発注記号順）	18
-----------	----

キミツ

優れた耐高真空性能をもつ多目的ステンレス缶

真空保管

半導体・医薬品
その他粉体・液体等

脱泡

グリース・インク
化粧品材料等

含浸

木材・金属等

特長

- きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。独特な構造のパッキングが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にくいこんで行き、強力に密閉します。
- 缶の胴体はリブ構造となっており、フタと底は内側へ湾曲成型してありますので、板厚 1.5mm ながら、約 -0.1Mpa の高真空下でも座屈しません。
- 真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。
- 真空圧ゲージを取り付けて、缶内圧をモニターできます。
- コスト・パフォーマンスも高く、材料の保管やプラント設備の一部等、幅広く使用されています。
- パッキングはシリコン製で、簡単に取り外して洗浄・スチーム殺菌ができます。

※ リーク(漏れ)の原因のほとんどは、パッキングに付着したゴミやヨゴレです。常にきれいな状態に保つことで、リークを防げます。



仕様

発注記号	容量	重量	寸法 (mm)			価格 (円/税別)
			外高	板厚	内径	
010-SS	10L	8.3kg	205	1.5	φ 390	
020-SS	20L	9.3kg	280			
030-SS	30L	11.1kg	400			
050-SS	50L	13.9kg	580			
100-SS	100L	18.0kg	488		φ 567	
200-SS	200L	27.5kg	920			


- ご購入時に付属されているパッキングは、シリコン製ダブルパッキングとなります。

キミツ 関連製品

パッキン

用途 缶を密閉するために、缶の縁に装着して使用します。

発注記号	品名	対応するキミツ	価格 (円/税別)
390-S	φ 390 シリコン製シングルパッキン	10 ~ 50L 用	
390-GK	φ 390 シリコン製ダブルパッキン		
390-SNBR	φ 390 NBR 製シングルパッキン		
390-GKNBR	φ 390 NBR 製ダブルパッキン		
390-SBY	φ 390 バイトン製シングルパッキン		
390-GKBY	φ 390 バイトン製ダブルパッキン		
567-S	φ 567 シリコン製シングルパッキン	100L, 200L 用	
567-GK	φ 567 シリコン製ダブルパッキン		
567-SNBR	φ 567 NBR 製シングルパッキン		
567-GKNBR	φ 567 NBR 製ダブルパッキン		
567-SBY	φ 567 バイトン製シングルパッキン		
567-GKBY	φ 567 バイトン製ダブルパッキン		

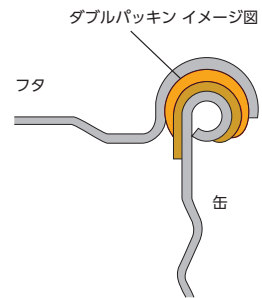

バリアカット

用途

カプラソケットをキミツのフタに取り付け、外気を導入して缶内を常圧に戻します。

発注記号	価格 (円/税別)
222-BC	

● 材質：カプラ部 真鍮



三方バルブ

用途


キミツと真空ポンプを接続し、バルブを回すだけで簡単に缶内の圧力を調節できます。

発注記号	価格 (円/税別)
222-VBC	

● 材質：ステンレス製

8A × φ 10.5 ホース口 … 真空ポンプへ接続

8A カプラソケット … キミツへ接続

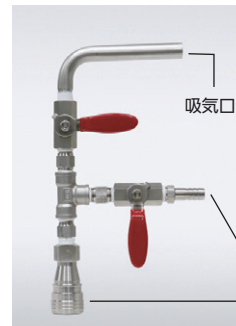

ゲージ



222-GM



222-GP

用途 キミツのフタに取り付け、缶内の真空度をモニターします。

発注記号	ゲージ目盛幅	価格 (円/税別)
222-GM	- 0.1 ~ 0 MPa	
222-GP	- 0.1 ~ 0.1 MPa	

キャスター



390-CR



567-CR

用途 キミツを載せて運搬するための台車です。

発注記号	品名	対応するキミツ	価格 (円/税別)
390-CR	台車 キミツφ 390 用	10 ~ 50L 用	
567-CR	台車 キミツφ 567 用	100L, 200L 用	


吸引ろ過缶



特長

- 内部観察ができるフルオープンタイプの吸引ろ過缶です。
- 様々な液受け容器を使えます。
- ステンレス容器と塩ビ製フタの組み合わせのため、丈夫で取り扱いが簡便です。

用途

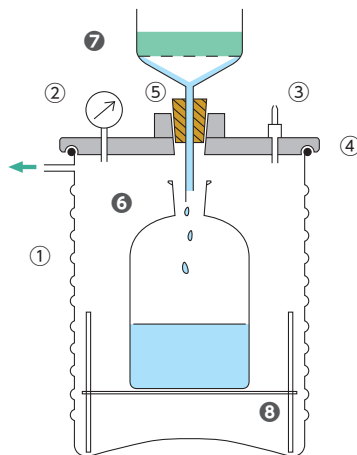

- ① ろ過缶の本体
 ② 真空圧ゲージ
 ③ 真空用プラグ
 ④ フタ
 ⑤ ゴム栓
 ⑥ ろ液受け容器
 ⑦ ロート
 ⑧ 受け台
- ②③④⑤は付属品
 ⑥⑦⑧は客先手配品

仕様

発注記号	容量	有効内寸法 (mm)	外寸法 (mm)	価格 (円/税別)
VF-10L	10L	φ 390 × H175	W440 × D440 × H295	
VF-20L	20L	φ 390 × H250	W440 × D440 × H370	
VF-30L	30L	φ 390 × H370	W440 × D440 × H490	
VF-50L	50L	φ 390 × H550	W440 × D440 × H670	

- 材質 本体：ステンレス SUS-304 t1.5 / パッキン：シリコンゴム / フタ：透明塩ビ

ガラス窓付き減圧容器



050-SSW



100-SSW



200-SSW

※フタの取っ手はオプションです。

特長

- 硝子窓から内部が観察できます。
- フタはフルオープンでき、容器内へのモノの出し入れが容易に行えます。


仕様

発注記号	容量	内径 (mm)	外高 (mm)	ノズル数	硝子窓数	価格 (円/税別)
050-SSW	50L	φ 390	580	2個	1個	
100-SSW	100L	φ 567	488	2個	2個	
200-SSW	200L	φ 567	920	2個	2個	


- 材質 本体：ステンレス SUS-304 t1.5 / パッキン：シリコンゴム

キミツ特注対応品

例：ホッパー型保管容器／架台付き

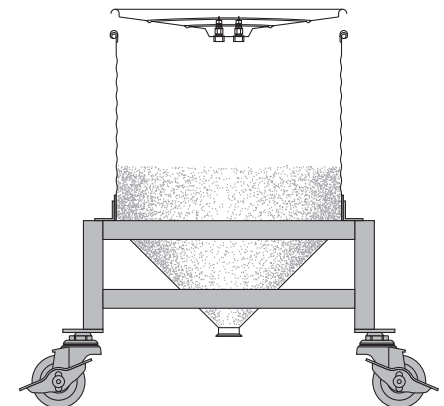

例：ジャケット付き保管容器

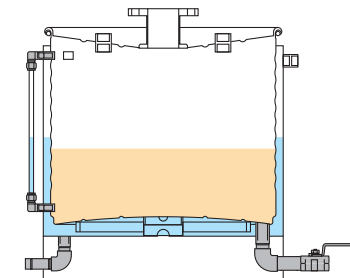

- その他の特注加工のご相談も承ります。詳細はお問い合わせください。

加圧保管容器

ステンレス・キャニスター



※写真は商品の一例です。

仕様

- 受注生産品です。材質や寸法など用途に合わせた製作が可能です。ご相談ください。

ヘルールボトル

耐食性・洗浄性に優れた高品質ステンレスボトル



SHB155



特長

- 耐食性に優れたステンレスを使用したフルオープンタイプのステンレスボトルです。
- 開口部はサニタリークランプ継手を使用し、密閉性、洗浄性ともに優れています。

仕様

発注記号	容量	内径 (mm)	内高 (mm)	板厚 (mm)	価格 (円/税別)
SHB155	0.155L	59.5	58	2.0	
SHB200	0.2L	59.5	81	2.0	
SHB500	0.5L	90	102	2.0	
SHB1000	1L	90	149	1.2	

- 材質 本体：ステンレス、パッキン：シリコンゴム
- 表面仕上げ 内外面：バフ研磨 #400/ 電解研磨

プラントアタッチメント

医薬品や化粧品などのプラント向けステンレスアタッチメント

特長

- 溶接部を丁寧に磨き上げ、生産性・洗浄性に優れています。



分岐管

- 従来のレギュレーサーを介さずコンパクトに分岐点をまとめられます。
- 接合部数が減ることにより、生産性に優れ、漏れやコンタミのリスクも減少します。



熱交換器

- 省スペースでの熱交換が可能です。
- 小型プラント向けです。



マグネットフィルター

- 直列に複数接続することで、より微細な金属片を除去することができます。



- 受注生産品です。その他アタッチメント類の製作も可能です。ご相談ください。

そるべん缶®

有機溶媒安全保管・小分け容器 PAT・第3101814号

有害ガスの吸入防止

溶媒に慣れてしまい揮散ガスの連続的な吸入に対して危機意識が低下していませんか？溶媒の取り扱い、労働安全衛生上も厳重な注意が必要です。

整理整頓の習慣化

実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済み溶媒の貯蔵・保管に利用できます。



3L (正面)

5L (横)

10L (裏)

特長

- 開口部はパッキン付きのネジフタで密閉できるため、内容物の漏出を防ぐことができます。
- 開口部のフタはチェーンで本体につながられているため、紛失の心配がありません。
- 3L以上の製品には持ち手が付いているため、容易に容器を持ち上げて小分け作業ができます。
- フラスコやビーカー、メスシリンダーなどに小分けしやすい、細口の注出管が付いています。
- 注出管のつけ根は円すい状になっており、液溜まりが少ない構造になっています。

仕様

発注記号	容量	重量	寸法 (mm)			価格 (円/税別)
			本体	総体	開口部内径	
SSC-01	1L	1.0kg	φ 140 × H190	W190 × H260	注入口：φ 42 注出口：φ 9.5	
SSC-02	2L	1.2kg	φ 140 × H250	W190 × H320		
SSC-03	3L	1.5kg	φ 200 × H235	W300 × H320		
SSC-05	5L	1.8kg	φ 200 × H315	W300 × H390		
SSC-10	10L	2.5kg	φ 200 × H430	W300 × H520		

- 材質 缶体：SUS-304 t1.0 / パッキン：テフロン (注入口) / テフロン・シリコンラミネートシート (注出口)
- 処理 外面：バフ研磨 (#300) / 内面：酸洗い

ラボ缶 R

有機溶媒安全保管容器

溶媒の自己管理

2004年度の国立大学などの法人化に伴い、実験室の有機溶媒の取り扱いに厳格な自己管理が求められています。耐震・防災に配慮した保管容器が必要です。

引火 → ボヤ → 火災の防止

無造作・無神経に床に置いた試薬びんを蹴飛ばし、中の有機溶媒が流れ、静電気の引火でボヤを起こしてしまったら、重大事故につながります。



3 L



5 L



10 L

特長

- ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤保管容器です。
- パッキン付きのネジフタで密閉できます。
- 270°のリング・クラッチが付いているため、持ち運び、取り扱いが簡便です。



仕様

発注記号	容量	重量	寸法 (mm)		価格 (円/税別)
			本体	開口部内径	
LC-01R	1L	0.8kg	φ 140 × H190	φ 42	
LC-02R	2L	1.0kg	φ 140 × H250		
LC-03R	3L	1.2kg	φ 200 × H230		
LC-05R	5L	1.4kg	φ 200 × H300		
LC-10R	10L	2.1kg	φ 200 × H425		

- 材質 缶体：SUS-304 t1.0 / パッキン：テフロン
- 処理 外面：バフ研磨 (#300) / 内面：酸洗い

カンラック

そるべん缶用溶媒小分けシステム〈ラック〉



カンラック



- 特長**
- 一斗缶を横にした状態で安定させることができます。


仕様

発注記号	商品名	寸法 (mm)	材質	価格 (円/税別)
CLC-01	カンラック	W290 × D290 × H400	SUS-304	


- そるべん缶 10L にはご使用いただけません。

バルブ

そるべん缶用溶媒小分けシステム

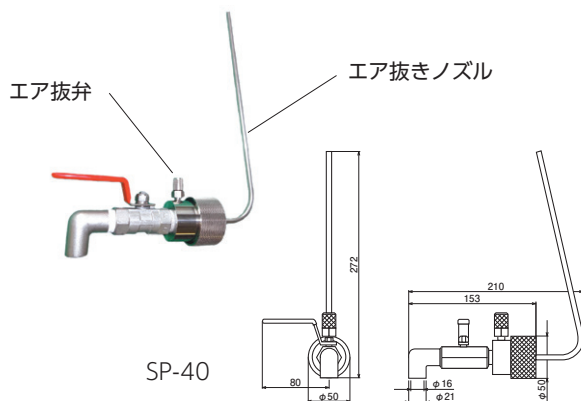

SP-40

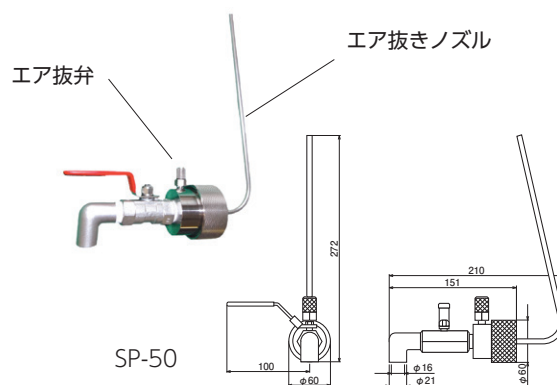

SP-50

- 特長**
- 一斗缶から効率的に小分け作業ができます。
 - 飛散せず、手も床も汚さず作業環境が快適です。
 - 完全密封式（エア抜きノズル付き）のため、揮発性物質、有害物質でも安全・衛生的です。
 - 耐食性、耐久性に優れています。

仕様

発注記号	缶吐出口外径 (mm)	材質	○ リング材質	価格 (円/税別)
SP-40	φ 41	SUS-304	PTFE	
SP-50	φ 48.8			

- 一斗缶の仕様により対応できない場合があります。

バスツール

真空断熱ジャケット付恒温水槽 PAT. 3110416



BT-60



BT-80





BT-100

特長

- 恒温循環装置と接続し、熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用します。
- 二重構造缶で、外側ジャケット部が真空断熱されています。
- 保温性に優れ、缶の外側に熱が伝わりにくい構造で、缶の外側表面への結露が起こりにくくなっています。
- 強力マグネチックスターラーを用いれば、フラスコやビーカーなどを加温または冷却しながら攪拌できます。

用途

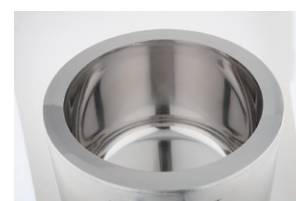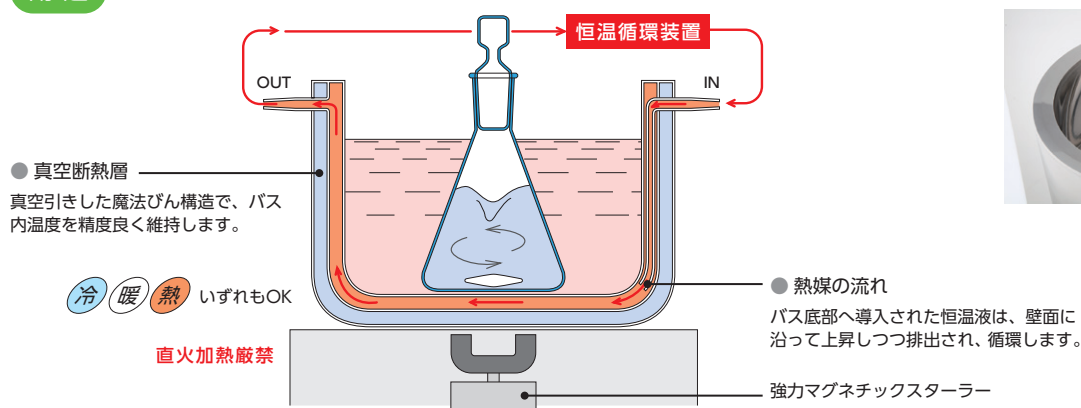

バスの内部

仕様

発注記号	内容量	ジャケット内液量	内寸法 (mm)	外寸法 (mm)	重量	ホース接続口 (mm)	価格 (円/税別)
BT-60	400ml	300ml	φ 98 × H60	φ 140 × H84	900g	φ 10.5 × 14	
BT-80	1800ml	770ml	φ 150 × H95	φ 202 × H120	2000g		
BT-100	3100ml	1130ml	φ 200 × H140	φ 240 × H160	3000g	φ 10.5 × 25	

- 材質 SUS-304 t1.0
- 処理 内外：バフ研磨 (#300)

フタ付ストレート缶

用途に合わせて豊富なサイズから選べる汎用缶

汎用容器 SST 缶



特長

- 粉体や液体などの一時保管用として最適な貯蔵缶です。
- フタを付けることによりホコリなどの混入を防ぎます。
- 材質 本体・フタ・袴・把手：SUS-304

密閉容器 SCTH 缶



特長

- 本体とフタをオリジナルのキャッチクリップで締め付け密閉状態にします。
- 標準パッキンにシリコンゴムを採用、内容物が飛散しません。
- 材質 本体・フタ・袴・キャッチクリップ・把手：SUS-304 / パッキン：シリコンゴム

密閉容器（レバーバンド式）SCTL 缶





特長

- 本体とフタの締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。
- 缶本体はSST缶と同様で本体・バンド・フタ・パッキンを取り外せるため、洗浄しやすくなっています。
- SCTL-24～47Hは缶が空でフタをしめた状態で段積みができます。容器の収納に大変便利です。
- 材質 本体・フタ・袴・レバーバンド：SUS-304 / パッキン：シリコンゴム

※注意 150L・200Lは積み重ねできません。

仕様

● 缶の形状

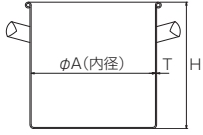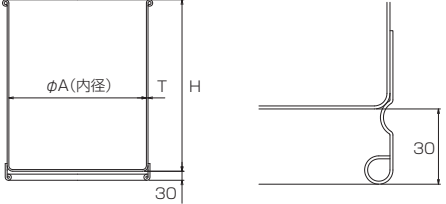10L～100L 容器	150L～200L 容器
	

● フタの形状

	10L～100L 容器	150L・200L 容器
汎用容器 SST 缶	 ストックフタ 平フタにつまみの付いたフタです。	 平フタ フタのずれ落ちを防ぐ、立ち下りの付いたかぶせフタです。
密閉容器 SCTH 缶	 A 型パッキン 缶の縁巻部分にかぶせて使用します。パッキンの着脱が非常に簡単。標準ではこのタイプが取り付けられます。  密閉フタ フタの立下りエッジ部に折り返しがついています。	 B 型パッキン フタの溝部分にパッキンが付く構造で、缶から内容物を注ぐときに邪魔にならず非常に便利です。  密閉フタ 缶の大型化に伴いフタの厚みを1.2mmとし強度を増しています。エッジ部に折り返しは付いていません。
密閉容器(バンド式) SCTL 缶	 L 型パッキン  L 型フタ フタの縁に折り返しがないので異物がたまりにくく洗浄しやすくなっています。  レバーバンド (積み重ねタイプ) ※ 積み重ねズレ防止用つまみ付き ※ レバーバンド開放防止用ロックピン付き	 B 型パッキン (SCTH 共用)  B 型フタ (SCTH 共用) フタの縁に折り返しがないので異物がたまりにくく洗浄しやすくなっています。  レバーバンド ※ 封印用のやげん取り付け止め穴付き ※ 積み重ねできません。 ※ ロックピンは付いていません。

容量	内径 φA (mm)	高さ H (mm)	板厚 T (mm)	汎用容器 SST 缶		密閉容器 SCTH 缶		密閉容器 SCTL 缶	
				発注記号	価格 (円 / 税別)	発注記号	価格 (円 / 税別)	発注番号	価格 (円 / 税別)
10L	240	240	0.7	SST-24		SCTH-24	19,400	SCTL-24	
15L	270	270	0.8	SST-27		SCTH-27	21,800	SCTL-27	
20L	300	300		SST-30		SCTH-30	24,200	SCTL-30	
25L	330	330		SST-33		SCTH-33	30,700	SCTL-33	
36L	360	360		SST-36		SCTH-36	37,100	SCTL-36	
45L	387	390	0.9	SST-39		SCTH-39	42,000	SCTL-39	
65L	430	450	1	SST-43		SCTH-43	51,900	SCTL-43	
80L	470	470	1.2	SST-47		SCTH-47	64,600	SCTL-47	
100L	470	600		SST-47H		SCTH-47H	69,400	SCTL-47H	
150L	565	600		SST-565		SCTH-565	102,300	SCTL-565	
200L	565	900	1.2	SST-565H		SCTH-565H	115,200	SCTL-565H	

フタ付テーパー缶

積み重ね収納できるテーパー型の汎用缶



特長

- ストレート缶に比べて深さ方向に約 1 度のテーパーが付いています。そのため、空容器を積み重ねて収納でき、省スペース化に役立ちます。
- 缶本体の厚みもストレート缶に比べて薄く軽量化を図っており、作業時の負担を軽減しました。

TP-SST テーパー型汎用缶



TP-SCTH テーパー型密閉缶




TP-SCTL テーパー型密閉缶（バンド式）



※ TP-SCTL 缶は底が小さくなっているため、SCTL 缶（ストレート缶）のような段積みはできません。

仕様

● 缶の形状

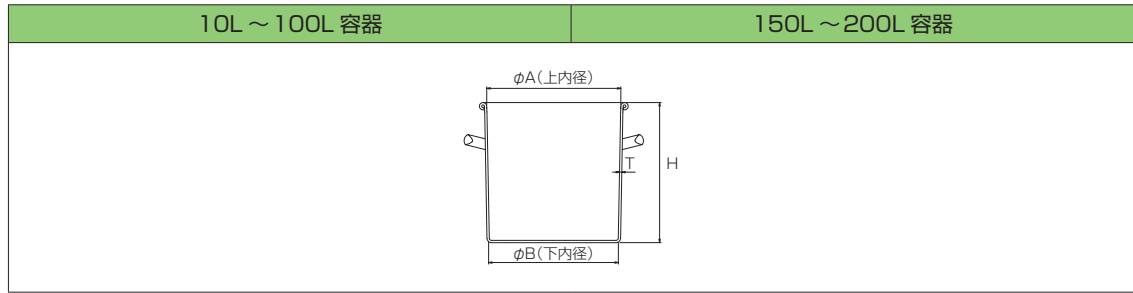

● フタの形状

	10L ~ 100L 容器	150L・200L 容器
汎用容器 TP-SST 缶	ストックフタ 平フタにつまみの付いたフタです。	平フタ フタのずれ落ちを防ぐ、立ち下がり の付いたかぶせフタです。
密閉容器 TP-SCTH 缶	A 型パッキン 缶の縁巻部分にかぶせて使用します。パッキ ンの着脱が非常に簡単。標準ではこのタイプ が取り付けられます。 密閉フタ フタの立下りエッジ部に折り返しがついてい ます。	B 型パッキン フタの溝部分にパッキンが付く構造で、缶か ら内容物を注ぐときに邪魔にならず非常に便 利です。 密閉フタ 缶の大型化に伴いフタの厚みを 1.2mm とし強 度を増しています。 エッジ部に折り返しは付いていません。
密閉容器 (バンド式) TP-SCTL 缶	L 型パッキン L 型フタ フタの縁に折り返しがないので異物がたまり にくく洗浄しやすくなっています。 レバーバンド (積み重ねタイプ) ※ 積み重ねズレ防止用つまみ付き ※ レバーバンド開放防止用ロックピン付き	B 型パッキン (SCTH 共用) B 型フタ (SCTH 共用) フタの縁に折り返しがないので異物がたまり にくく洗浄しやすくなっています。 レバーバンド ※ 封印用のやげん取り付け止め穴付き ※ 積み重ねできません。 ※ ロックピンは付いていません。

容量	上内径 φ A (mm)	下内径 φ B (mm)	高さ H (mm)	板厚 T (mm)	汎用容器 SST 缶		密閉容器 SCTH 缶		密閉容器 SCTL 缶	
					発注記号	価格 (円 / 税別)	発注記号	価格 (円 / 税別)	発注記号	価格 (円 / 税別)
10L	240	230	244	0.6	TP-SST-24		TP-SCTH-24	21,000	TP-SCTL-24	
15L	270	260	279	0.7	TP-SST-27		TP-SCTH-27	24,200	TP-SCTL-27	
20L	300	289	304		TP-SST-30		TP-SCTH-30	26,700	TP-SCTL-30	
25L	330	318	336		TP-SST-33		TP-SCTH-33	33,900	TP-SCTL-33	
35L	360	346	362		TP-SST-36		TP-SCTH-36	40,400	TP-SCTL-36	
45L	387	373	405	0.8	TP-SST-39		TP-SCTH-39	46,000	TP-SCTL-39	
65L	430	413	475		TP-SST-43		TP-SCTH-43	57,100	TP-SCTL-43	
80L	470	452	485	1	TP-SST-47		TP-SCTH-47	71,000	TP-SCTL-47	
100L	470	448	615		TP-SST-47H		TP-SCTH-47H	79,100	TP-SCTL-47H	
150L	565	543	635	1	TP-SST-565		TP-SCTH-565	115,000	TP-SCTL-565	
200L	565	534	905		TP-SST-565H		TP-SCTH-565H	134,100	TP-SCTL-565H	

チタン容器

多様な形状・サイズ・仕上げのチタン製容器をラインアップ

● 材質（共通） JIS1 種 TP-270

※チタン JIS 1 種：純チタンの中でも最も軟質で、プレス、曲げなどの成形加工性に優れます。

チタン製丸型容器



仕 様

発注記号	容量	寸法 (mm)	価格 (円 / 税別)
TN-4620-160	5L	φ 200 × H160	
TN-4626-200	10L	φ 260 × H200	
TN-4630-240	16L	φ 300 × H240	
TN-4633-260	22L	φ 330 × H260	
TN-4636-320	30L	φ 360 × H320	

チタン製密閉容器（ストレート容器）



仕 様

発注記号	容量	寸法 (mm)	価格 (円 / 税別)
TN-424KB	8L	φ 240 × H190	
TN-426KB	10L	φ 260 × H200	
TN-430KB	16L	φ 300 × H240	
TN-433KB	22L	φ 360 × H260	

● 材質 バンド：ステンレス／パッキン：シリコン

チタン製角型容器



仕 様

発注記号	容量	寸法 (mm)	価格 (円 / 税別)
TN-4209-70	0.5L	90 × 90 × H70	
TN-4212-90	1.2L	120 × 120 × H90	
TN-4215-120	2.5L	150 × 150 × H120	
TN-4220-160	6.0L	200 × 200 × H160	
TN-4227-170	12L	270 × 270 × H170	
TN-4233-200	20L	330 × 330 × H200	

チタン製スコップ



仕 様

発注記号	寸法 (mm)	価格 (円 / 税別)
TN-764	78 × 134	

チタン製バット



仕 様


発注記号	容量	寸法 (mm)	価格 (円 / 税別)
TN-1911-E20	2.4L	530 × 325 × H20	
TN-1912SW	5.0L	530 × 325 × H65	
TN-1914SW	10.0L	530 × 325 × H100	
TN-1916SW	20.0L	530 × 325 × H150	
TN-1871E20	1.9L	352 × 325 × H20	
TN-1872SW	5.5L	352 × 325 × H65	
TN-1522SW	4.0L	325 × 265 × H65	
TN-1524SW	6.4L	325 × 265 × H100	

チタン製バット用蓋

仕 様

発注記号	適用チタン製バット	価格 (円 / 税別)
TN-1910C	TN-1911-E20	
	TN-1912SW	
	TN-1914SW	
	TN-1916SW	
TN-1870C	TN-1871E20	
	TN-1872SW	
TN-1520C	TN-1522SW	
	TN-1524SW	

チタン製ロート

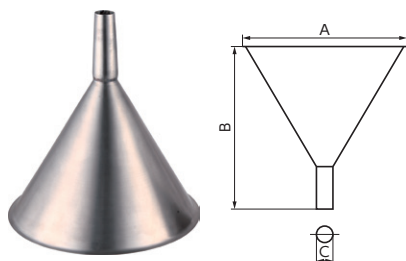

仕 様

発注記号	寸法 (mm)			価格 (円 / 税別)
	A	B	C	
TN-603	φ 76	90	φ 14	
TN-604	φ 108	105	φ 14	
TN-605	φ 128	133	φ 14	
TN-606	φ 152	153	φ 14	
TN-607	φ 178	195	φ 22	
TN-608	φ 210	226	φ 22	
TN-609	φ 232	241	φ 22	

チタン製ビーカー 手無し



仕 様

発注記号	容量	寸法 (mm)	価格 (円 / 税別)
TN-631	100cc	φ 53 × H56	
TN-632	200cc	φ 63 × H72	
TN-633	300cc	φ 74 × H80	
TN-634	500cc	φ 92 × H90	
TN-635	1000cc	φ 110 × H108	
TN-636	1500cc	φ 120 × H140	

チタン製ビーカー 手付き



仕 様

発注記号	容量	寸法	価格 (円 / 税別)
TN-631H	100cc	φ 53 × H 56	
TN-632H	200cc	φ 63 × H 72	
TN-633H	300cc	φ 74 × H 80	
TN-634H	500cc	φ 92 × H 90	
TN-635H	1000cc	φ 110 × H108	
TN-636H	1500cc	φ 120 × H140	

索引 (発注記号順)

発注記号	ページ	発注記号	ページ	発注記号	ページ
数字		SCTH-565	12, 13	TN-426KB	16
010-SS	2	SCTH-565H	12, 13	TN-430KB	16
020-SS	2	SCTL-24	12, 13	TN-433KB	16
030-SS	2	SCTL-27	12, 13	TN-4620-160	16
050-SS	2	SCTL-30	12, 13	TN-4626-200	16
050-SSW	5	SCTL-33	12, 13	TN-4630-240	16
100-SS	2	SCTL-36	12, 13	TN-4633-260	16
100-SSW	5	SCTL-39	12, 13	TN-4636-320	16
200-SS	2	SCTL-43	12, 13	TN-603	17
200-SSW	5	SCTL-47	12, 13	TN-604	17
222-BC	3	SCTL-47H	12, 13	TN-605	17
222-GM	3	SCTL-565	12, 13	TN-606	17
222-GP	3	SCTL-565H	12, 13	TN-607	17
222-VBC	3	SHB1000	6	TN-608	17
390-CR	3	SHB155	6	TN-609	17
390-GK	3	SHB200	6	TN-631	17
390-GKBY	3	SHB500	6	TN-631H	17
390-GKNBR	3	SP-40	10	TN-632	17
390-S	3	SP-50	10	TN-632H	17
390-SBY	3	SSC-01	8	TN-633	17
390-SNBR	3	SSC-02	8	TN-633H	17
567-CR	3	SSC-03	8	TN-634	17
567-GK	3	SSC-05	8	TN-634H	17
567-GKBY	3	SSC-10	8	TN-635	17
567-GKNBR	3	SST-24	12, 13	TN-635H	17
567-S	3	SST-27	12, 13	TN-636	17
567-SBY	3	SST-30	12, 13	TN-636H	17
567-SNBR	3	SST-33	12, 13	TN-764	16
B		SST-36	12, 13	TP-SCTH-24	14, 15
BT-60	11	SST-39	12, 13	TP-SCTH-27	14, 15
BT-80	11	SST-43	12, 13	TP-SCTH-30	14, 15
BT-100	11	SST-47	12, 13	TP-SCTH-33	14, 15
C		SST-47H	12, 13	TP-SCTH-36	14, 15
CLC-01	10	SST-565	12, 13	TP-SCTH-39	14, 15
L		SST-565H	12, 13	TP-SCTH-43	14, 15
LC-01R	9	T		TP-SCTH-47	14, 15
LC-02R	9	TN-1520C	17	TP-SCTH-47H	14, 15
LC-03R	9	TN-1522SW	17	TP-SCTH-565	14, 15
LC-05R	9	TN-1524SW	17	TP-SCTH-565H	14, 15
LC-10R	9	TN-1870C	17	TP-SCTL-24	14, 15
S		TN-1871E20	17	TP-SCTL-30	14, 15
SCTH-24	12, 13	TN-1872SW	17	TP-SCTL-36	14, 15
SCTH-27	12, 13	TN-1910C	17	TP-SCTL-39	14, 15
SCTH-30	12, 13	TN-1911-E20	17	TP-SCTL-43	14, 15
SCTH-33	12, 13	TN-1912SW	17	TP-SCTL-47	14, 15
SCTH-36	12, 13	TN-1914SW	17	TP-SCTL-47H	14, 15
SCTH-39	12, 13	TN-1916SW	17	TP-SCTL-565	14, 15
SCTH-43	12, 13	TN-4209-70	16	TP-SCTL-565H	14, 15
SCTH-47	12, 13	TN-4212-90	16	TP-SST-24	14, 15
SCTH-47H	12, 13	TN-4215-120	16	TP-SST-27	14, 15
		TN-4220-160	16	TP-SST-30	14, 15
		TN-4227-170	16	TP-SST-33	14, 15
		TN-4233-200	16	TP-SST-36	14, 15
		TN-424KB	16	TP-SST-39	14, 15
				TP-SST-43	14, 15

発注記号	ページ
TP-SST-47	14, 15
TP-SST-47H	14, 15
TP-SST-565	14, 15
TP-SST-565H	14, 15

V

VF-10L	4
VF-20L	4
VF-30L	4
VF-50L	4

【製造元】



株式会社スギヤマゲン

【販売】

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL: 050-3514-4817(機器システム課)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
TEL: 050-3514-4901(機器システム課)

●北海道営業所 ●東北営業所 ●筑波営業所 ●横浜営業所
●東海営業所 ●中国営業所 ●九州営業所

URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/equipment/index.html>