


## そるべん缶 周辺器具

- CLC-01 & SP-40、50 そるべん缶用溶媒小分けシステム ラック & バルブ



- 簡単小分けで作業効率アップ!
- 飛散せず、手も床も汚さず作業環境が快適!
- バルブは完全密封式 (エア抜きパイプ付き) 揮発性、有害物質でも安全・衛生的。耐食性、耐久性あり。

### ● カンラックS

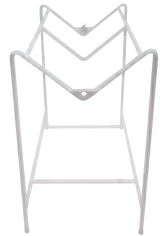


品名	缶ラック S
発注記号	CLC-02
寸法(mm)	290W×355D×560H
材質	SS材
価格(円)	11,000

### ● カンラック




品名	缶ラック
発注記号	CLC-01
寸法(mm)	290W×290D×400H
材質	SUS-304
価格(円)	19,800

### ● SP-40

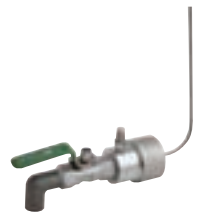


品名	バルブ
発注記号	SP-40
缶吐出口外径(mm)	φ41
材質	SUS-304
Oシール材質	PTEE
価格(円)	28,500

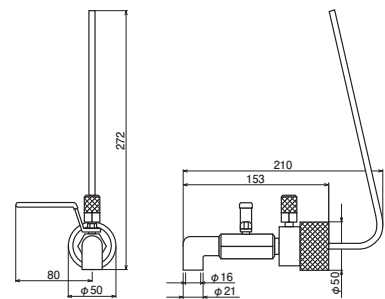

### ● SP-50



品名	バルブ
発注記号	SP-50
缶吐出口外径(mm)	φ48.8
材質	SUS-304
Oシール材質	PTEE
価格(円)	32,000

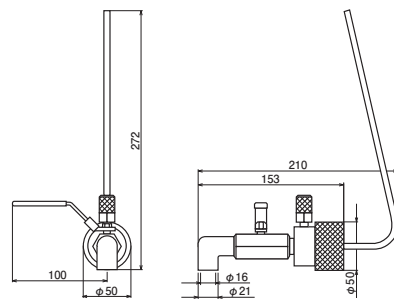

<製造> スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷2-34-9  
 TEL: 03-3814-0285 FAX: 03-3815-3045  
 http://www.sugiyama-gen.co.jp  
 e-mail: mail@sugiyama-gen.co.jp

### 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道徳町三丁目1番2号  
 TEL: 06-6203-2759 (機器営業部)  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号  
 TEL: 03-3270-8124 (機器営業部)

●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代) ●中国営業所 TEL: 082-669-6095 (代)  
 ●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代) ●東近畿営業所 TEL: 029-858-2278 (代)  
 ●東北営業所 TEL: 022-762-7725 (代) ●北海道営業所 TEL: 011-4271-6285 (代)  
 ●横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/equipment/index.html>

研究室の  
必需品

# 有機溶媒安全保管 - 小分け容器

Solvent Strong Can

# そるべん缶<sup>®</sup>

割れない!!  
漏れない!!  
使いやすい!!

<パッキンの材質>  
—テフロン<sup>®</sup>膜  
—シリコンゴム



## あなたの実験室の備えは万全ですか?

### 溶媒の自己管理

2004年度からの国立大学など学校法人化に伴い、実験室の有機溶媒の取り扱いに、厳格な自己管理が求められます。耐震・防災に配慮した容器の手配はお済みですか?

### 引火→ボヤ→火災

無造作・無神経に床に置いてあった試薬びんを蹴飛ばし、中の有機溶媒が流れ、静電気の引火でボヤでも起こそうものなら、重大な自己責任につながります。

### 有害ガスの吸入防止

溶媒に慣れてっことで、揮散ガスを連続的に吸入することに危機意識が希薄になってはいませんか? 溶媒の取扱いは、労働安全衛生上も、厳重な注意が必要です。

### 整理整頓の習慣化

実験室で使われる多品種の溶媒の・貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済み溶媒の・貯蔵・保管に、そるべん缶をご使用ください。



# そるべん缶

## ● そるべん缶 本体

- ステンレス製の頑丈でこわれにくい、耐震・防災・労働安全衛生に配慮した有機溶媒保存容器です。
- 開口部（注出口、注入口）はパッキン付きのネジフタで密閉でき、中身がこぼれたり、揮発ガスの漏出を防げます。（フタはチェーンで本体につながられており、紛失の心配がありません。）
- 堤げ手と把手が付いており、容器を持ち上げての分注作業が容易です。
- フラスコやビーカー、メスシリンダー等に小分けのしやすい、細口の注出管が付いています。
- 給気用のバルブを備えています。

1L



2L



3L



5L



10L

品名	そるべん缶1L	そるべん缶2L	そるべん缶3L	そるべん缶5L	そるべん缶10L	
発注記号	SSC-01	SSC-02	SSC-03	SSC-05	SSC-10	
容量	1L	2L	3L	5L	10L	
風体重量	1.0kg	1.2kg	1.5kg	1.8kg	2.5kg	
寸法	本体寸法(mm)	φ140×190H	φ140×250H	φ200×235H	φ200×315H	φ200×430H
	総体寸法(mm)	190W×260H	190W×320H	300W×320H	300W×390H	300W×520H
	開口部内径(mm)	図①：φ9.5 図②：φ42				
材質	缶体	SUS-304 1.0t				
	パッキン	テフロンガラスシート				
処理	外面	バフ研磨(#300)				
	内面	酸洗い				
価格(円)	23,500	24,500	26,500	28,500	33,500	

## ● SLC-01 そるべん缶用溶媒小分けハンガー 「そるべんラック」



- そるべん缶を堤げ手の部分で吊り下げるハンガーです。
- 把手を持ち上げるだけで、そるべん缶から簡単に他の容器への小分けができます。
- 中身が多量に入っていて重い場合でも、軽々と安全に小分けができます。

品名	そるべんラック
型式	SLC-01
寸法(mm)	350W×350D×620H
材質	SUS-304
適合機種(容量)	そるべん缶3L、5L、10L
価格(円)	25,000

# ラボ缶R

## ● ラボ缶R

- ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。
- パッキン付のネジフタで密閉できます。
- 270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。

1L



2L



パッキン

リング・クラッチ



3L



5L



10L

品名	ラボ缶 1L	ラボ缶 2L	ラボ缶 3L	ラボ缶 5L	ラボ缶 10L	
発注記号	LC-01R	LC-02R	LC-03R	LC-05R	LC-10R	
容量	1L	2L	3L	5L	10L	
風袋重量	0.8kg	1.0kg	1.2kg	1.4kg	2.1kg	
寸法	本体寸法(mm)	φ140×190H	φ140×250H	φ200×230H	φ200×300H	φ200×425H
	開口部内径(mm)	φ42				
材質	缶体	SUS-304 1.0t				
	パッキン	テフロンガラスシート				
処理	外面	バフ研磨(#300)				
	内面	酸洗い				
価格(円)	17,000	17,500	18,500	20,500	25,500	