

メディカル機器シリーズ

薬用保冷库



業務用冷蔵庫のトップメーカーの実績と信頼から誕生

- 信頼性の高いマイコン制御方式の採用で適切な環境を作ります。
- 大容量で多目的に使えます。
- 50年以上にわたり温度のコントロール技術を培った弊社の高性能技術で高品質管理を実現いたします。

温度2℃～23℃

マイコン制御温度管理

庫内温度はデジタル表示です。万一の時、異常表示・ブザー報知など警報機能も充実しています。



棚網の可変

棚受けを調整することにより設置棚の位置が移動できるので、理想的な高さに調節できます。(約1cm間隔で調節可能)


サービスコンセント

製品左側面にサービスコンセントを用意しております。(適用コンセント5A125V)



機能的な測定孔

両サイドに測定孔装備でユーザーフレンドリー仕様。センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防ぎかつ衛生的です。

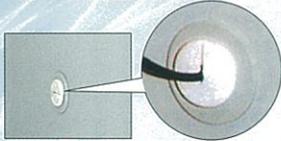

持ちやすいハンドル

ゆるやかな曲線をデザインしたハンドル部は安全性も高く、にぎりやすいために開閉が容易です。



フィルター清浄不要

ドレン排水処理不要


キャスター付

遮光フィルム仕様 (オプション)

紫外線を含めた外部からの光を遮光します。半透明仕様もあります。冷暗所保存薬品用として使用できます。

サーモレコーダー (オプション)

保冷温度状態の履歴を自動記録できます。
※記録紙1年分(12コ)付属
標準価格:55,000円

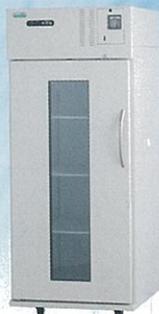

FMS-650L

有効内容積 **635L**

外形寸法 W770×D795(816)×H1,905mm
内形寸法 W670×D645×H1,470mm
標準価格 **700,000円**




FMS-1400L


有効内容積 **1355L**

外形寸法 W1,500×D795(816)×H1,905mm
内形寸法 W1,400×D645×H1,470mm
標準価格 **910,000円**



※写真は2機種共にサーモレコーダー(オプション)付きです。

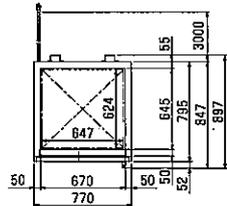

FMS-650L

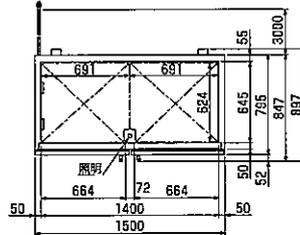

FMS-1400L

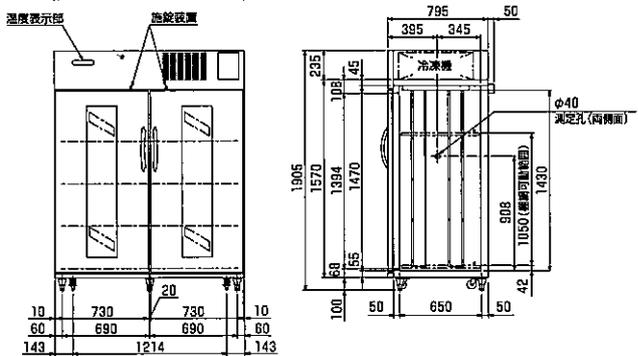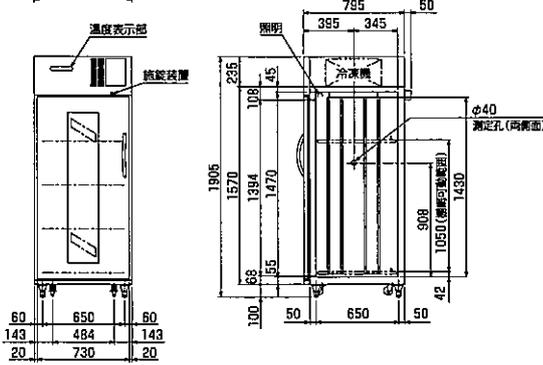

機種名		FMS-650L	FMS-1400L		
寸法	外形(mm)(幅×奥行×高さ)	770×795(816)×1905	1500×795(816)×1905		
	内形(mm)(幅×奥行×高さ)	670×645×1470	1400×645×1470		
	有効内容積(ℓ)	635	1355		
	製品質量(kg)	126	206		
材質	外装	ポリエステル樹脂粉末塗装			
	内装	ポリエステル樹脂粉末塗装			
	扉	表面:ポリエステル樹脂粉末塗装 裏面:ポリエステル樹脂粉末塗装 マグネット式1枚			
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
冷却装置	温度調節範囲	2~23℃			
	圧縮機公称出力	300W			
	冷媒制御方式	キャピラリーチューブ			
	凝縮器	ワイヤチューブ強制空冷式	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式			
	冷媒	R-404A 130g	R-404A 190g		
電源	種取方式	マイコン制御	サイクルデフロスト		
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz			
	適用コンセント形式	接地付き 2種 15A 125V			
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	通常	運転電流(A)	4.2/4.2	5.1/5.1
			始動電流(A)	22.2/22.5	26.3/26.3
			消費電力(W)	410/450	425/465
			力率(%)	79/85	83/91
	加温時 (50/60Hz)	最大	運転電流(A)	6.5/6.5	8.4/8.4
			消費電力(W)	590/630	775/815
			運転電流(A)	2.0/2.0	4.2/4.2
			消費電力(W)	220/220	445/445
	力率(%)	100/100	100/100		
使用周囲温度	-5~35℃		-5~35℃		
放熱量	435/475W		470/510W		
照明	紫外線防止蛍光灯 15W		紫外線防止蛍光灯 40W		
脚・調節範囲	100~110mm(キャスター付)		100~110mm(キャスター付)		
付属品	棚網4枚、鍵		棚網8枚、鍵		
オプション	自記温度記録計、遮光フィルム仕様		自記温度記録計、遮光フィルム仕様		

全国251カ所。信頼のサービスネットワーク
 フクシマでは、製品を安心してお使いいただくため、日本全国251カ所で
 アフターケアが実施できるサービス体制を確立しています。

メンテナンス制度

お使いいただく機器の日頃のお手入れ、保守管理は非常に大切です。
 フクシマでは、保証期間後も定期点検を実施するメンテナンス制度
 を用意しております。

集中管理システム SSSマスター

- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録・保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにてすぐに通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。(FDA 21CFR Part.11準拠)

■電源コンセント形状
 ●接地形2種15A125V

12.7

バリデーションサービス

● 別定 点 お客様のご要望により、別途打合
 ● 料 金 お客様のご要望により、別途見積



富士フィルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
 TEL: 06-6203-2759 (機器営業部)
 東 京 本 店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
 TEL: 03-3270-8124 (機器営業部)

- 九州営業所 TEL: 092-622-1005 (代)
- 中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)
- 東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)
- 筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)
- 東北営業所 TEL: 022-762-7725 (代)
- 北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)
- 横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/equipment/index.html>