

GALILEI

Be cool, Be alive.

2023～2024年版

メディカル・ライフサイエンス製品 総 合 カ タ ロ グ

薬用保冷库／薬用冷凍冷蔵庫／メディカルフリーザー
低温インキュベーター／超低温フリーザー／血液用冷蔵庫／コールドベンチ
クリーンベンチ／純水生成装置／プレハブ冷蔵・冷凍・恒温庫

MediFridge

薬用保冷库・冷凍庫



LAB Line

低温インキュベーター



Vital

超低温フリーザー



For Multi Solution

Dramatic Future 2050

誰もがワクワクする未来を拓く、ガリレイグループ

私たちが目指すサステナビリティは、生産からテーブルに並ぶまで

温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること。

食といのちの未来のために、何があっても挑戦し続けます。

それが必ず、誰もがワクワクする未来を拓くと信じているからです。



環境Action 2030 グリーン冷媒への転換

2025年の新規製品・新規設備へ使用する冷媒はグリーン冷媒(低GWP冷媒、ノンフロン冷媒)への転換を通じ、温室効果ガス低減に取り組み、地球温暖化防止に貢献します。

ガリレイグループのサステナブルビジョンについてご紹介しています



ノンフロン冷媒R1234yfを新たに採用


Dramatic Future 2050の取り組みの一環として、新規製品に微燃性ノンフロン冷媒R1234yfを採用します。

現地でのメンテナンスが難しい強燃性ノンフロン機器に比べ、微燃性ノンフロン機器は現地でメンテナンスが可能です。※

※JRA GL-23.2022に沿って対応

R1234yfはオゾン層破壊係数(ODP)がゼロ、地球温暖化係数(GWP)が1でCO2と同等のため、地球環境への負荷が少ない冷媒です。R1234yfの燃焼性等級(ISO817)はA2Lクラスに属しており、A3クラスの強燃性ノンフロン(R600a)と比べより安全です。

GWP比較

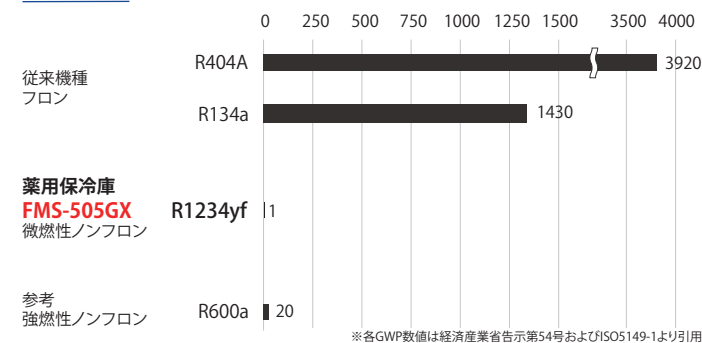

薬用保冷庫
FMS-505GX



薬用冷凍冷蔵庫
FMS-F155GSX


冷蔵&冷凍の試薬・薬品保管の常識を変える 薬用保冷库・冷凍庫のフラッグシップモデル

MediFridge シリーズ

なぜ、冷蔵試薬・薬品の保管は、スライド型のショーケースでなくてはならないのか？
その疑問から、従来の常識を打ち破るべく薬用保冷库MediFridgeが誕生しました。
スライド型のショーケースでは、扉を横にスライドさせるため、可動部にどうしても隙間が必要で、
それが原因で、冷氣漏れ、結露など多くの困りごとがありました。
それらを解決できる製品をお客様に届けたい。－これこそサブテーマの「For Multi Solution」です－
MediFridgeシリーズには、「新しい価値をお届けしたい」私たちのそんな想いが込められています。


薬用保冷库を皮切りに、冷凍冷蔵庫・小型薬用保冷库・メディカルフリーザーがラインナップとして、
新たにMediFridgeシリーズに加わりました。
省エネ・省スペース・高精度制御・対結露性能向上をMediFridgeシリーズのコンセプトに、
皆様にとって、ユーザーフレンドリーかつ新しい価値をお届けします。

MediFridge コンセプト

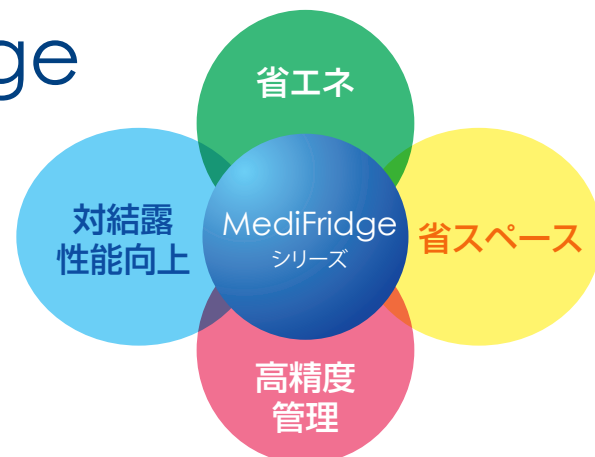

低温インキュベーター LAB Line シリーズ

ユーザー様へもっとお役に立ちたい思いから、
LABつまり研究・実験・検査される
ユーザー様から当社まで
Lineのごとく繋がった
コミュニティをイメージしています。
ワイドレンジモデルを追加し、
より多くの用途でお使い頂ける
ようになりました。

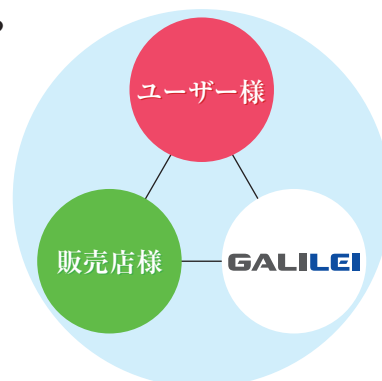

超低温フリーザー Vital シリーズ

Vitalとは「生命」や「力強い」などの
意味があります。
検体やウィルス・細胞等の長期保管に使用する
超低温フリーザーに最適な名称です。
ノンフロン冷媒やデュアル冷却方式を採用した
機種もあり、お客様の様々なニーズに合わせて
ラインナップをご用意しております。


薬用保冷库『MediFridge』2つの特徴

1. 厳密な常温保管から、冷温保管まで1台で対応出来る薬用保冷库へ!

運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード


温度範囲が2～25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみならず、常温薬品の保管もできます。

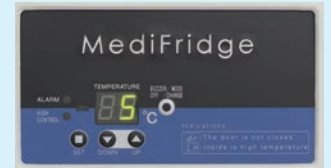




EC(ECO Control)モード
1℃単位で表示

HC(High Control)モード




設定温度 3℃、4℃、5℃の選択が可能です。
●温度分布(設定±1℃以内)
●温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。
厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。

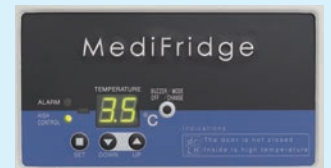

HC(High Control)モード
1～7℃を0.1℃単位で表示

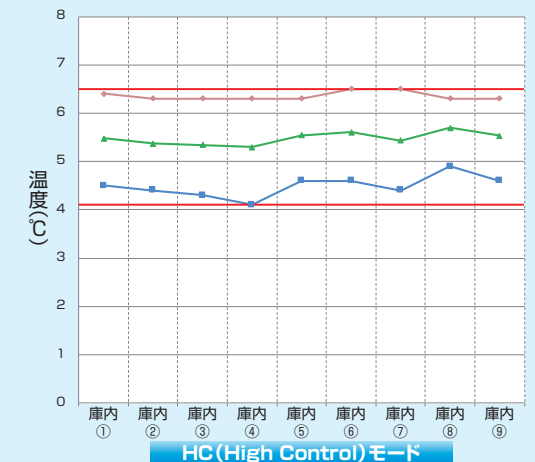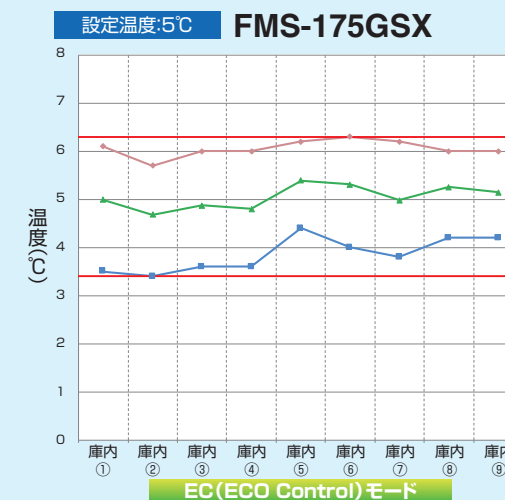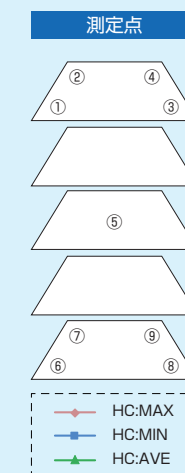

※測定条件 周囲温度30℃ 湿度60% 無負荷 庫内9点 空気温度測定。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。
※各データは当社基準で測定しております。

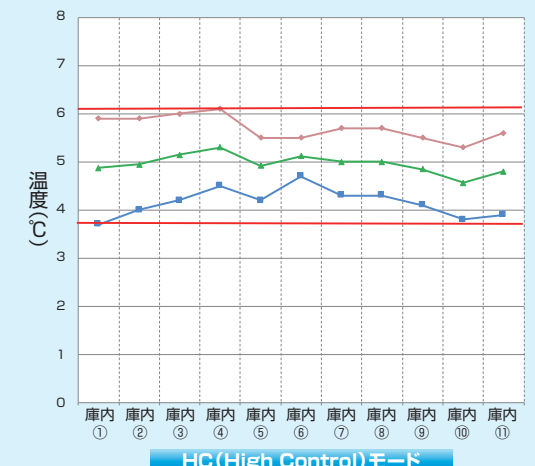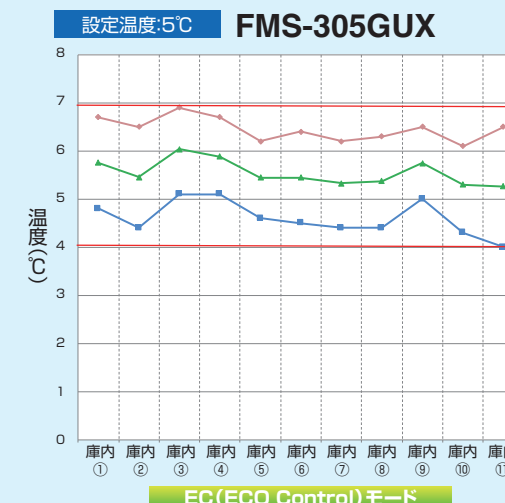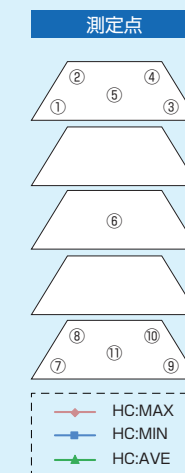

※測定条件 周囲温度30℃、湿度60%、無負荷 庫内11点 空気温度測定。
※各特性値は製品・運転・設置条件などによって若干異なる場合があります。
※各データは当社基準で測定しております。

2.スイング扉だから出来る使い勝手のよさと安全安心な保冷環境

結露の少ない安定した保冷環境

■ 扉の違い

スライド型

樹脂枠

スイング型

● 扉ガラス周りにウレタン発泡材入りで、熱ロスを低減します。

● 庫内収容物を確認できるガラス面積も確保しています。

● 結露の発生しやすいガラス周囲にヒーターを通电、表面温度上昇と結露を極力抑えます。

断熱材枠

ヒーター

省スペース対応

500mm

500mm

収容物出し入れの為、500mm程度スペース必要。

FMS-305GUX
FMS-505GX

FMS-1004G

362

320

320

W=800mm

462

430

429.5

398.5

W=1550mm

500mm未満の為、手前側に余分なスペースの必要がありません。
幅寸法もより小さく、大容量に!!

閉め忘れ防止 収容物の取り出し

90°以内は自動で扉が閉まる仕様で、閉め忘れを防止します。
ドアセンサーも標準装備。更なる安心・安全な保管環境をご提供します。

スライド扉は片方ずつしか開きません。

片側開きも、両側開きも可能。
収容物の取り出しが容易になります。

選べるカラーバリエーション

標準色(アイボリー)に加えて、ブラウン、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、スカイブルーの6色からお選びいただけます。お好みに合わせてお選びください。

ブラウン

ピンク

オレンジ

イエロー

グリーン

スカイブルー

6つのカラーバリエーションからお好みに合わせて色を選択

標準色(アイボリー)に加えて、ブラウン、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、スカイブルーの6色からお選びいただけます。お好みに合わせてお選びください。

機能的に空間を演出

内観に合わせて製品の機械室パネルと天飾り部の色を選択することができ、トータルコーディネートできます。

ゾーニング

色でゾーニングを行うことで各セクションが認識しやすくなります。診療科目に合ったイメージの色を使用することで直感的な判断と理解が可能です。

試薬・薬品別・ご担当者ごとの認識保管

保管物や担当者によって製品の色を変えることで、視覚的に判断ができるので取り間違を防ぎます。

小型薬用保冷庫

ノンフロン仕様に
モデルチェンジ

▶▶▶ P7に掲載

薬用保冷庫

ノンフロン仕様に
モデルチェンジ

▶▶▶ P8に掲載

薬用冷凍冷蔵庫

ノンフロン仕様に
モデルチェンジ

▶▶▶ P9に掲載

低温
インキュベーター

標準モデルとワイド
レンジモデル合わせて
9種類のラインナップ

▶▶▶ P11に掲載

超低温
フリーザー

冷凍回路が2つある
デュアル冷却方式

▶▶▶ P12に掲載

薬用保冷庫シリーズ P7~9

小型薬用保冷庫 MediFridge
スリム型薬用保冷庫 MediFridge
薬用保冷庫 MediFridge
薬用冷蔵ショーケース
薬用保冷庫
薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge

メディカルフリーザーシリーズ P10

メディカルフリーザー パーソナル
メディカルフリーザー MediFridge

低温インキュベーター LABLine シリーズ P11

低温インキュベーター 標準モデル
低温インキュベーター ワイドレンジモデル

超低温フリーザーシリーズ P12~13

超低温フリーザー Vital
超低温フリーザー(二元冷却式)
超低温フリーザー(シングルコンプレッサー)

その他保冷庫・関連機器シリーズ P13~15

血液用冷蔵庫
車載コールドボックス
コールドベンチ
卓上型クリーンベンチ
純水生成装置

業務用機器・その他関連機器シリーズ P16~17

インバーター制御 業務用冷蔵庫
スライド扉リーチインショーケース キュービックタイプ(ドリンク用)
製氷機(キューブアイス・チップアイス・フレークアイス)
コールドロッカー、蓄冷剤用急速凍結専用庫、
ブラストチラー/ショックフリーザー

大型組立シリーズ P17~18

プレハブ型冷蔵庫・冷凍庫・恒温庫(インキュベーター)

温度測定関連 P19

保守・バリデーションサポートサービス P20

オプション P21~22

薬用保冷庫

メディカルフリーザー

低温インキュベーター

超低温フリーザー

その他保冷庫

業務用機器

大型組立

温度測定関連

保守・バリデーションサポートサービス

オプション

5

6

小型薬用保冷库 MediFridge



製品の詳細はこちら▶



HCモード
3℃~5℃
(1℃単位)

ECモード
2℃~25℃
(1℃単位)




FMS-055GMX



バスケット標準装備

内形寸法
W344×D244×H99mm

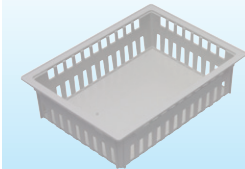

特 徴

- 台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ
- 小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備
- 標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備

	型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	バスケット	質 量	標準価格(税抜)
小型薬用保冷库 MediFridge	FMS-055GMX	42L	W500×D452(482)×H690mm	2個	27kg	168,000円

毒・劇薬の管理に




鍵付収納セット使用例
(オプション)

アンプルなどの収納に



小分け収納ケース使用例
(オプション)

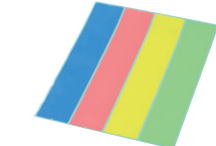

識別用帯シール 1セット(2枚)
(オプション) 標準価格:1,600円(税抜)

スリム型薬用保冷库 MediFridge



製品の詳細はこちら▶



HCモード
3℃~5℃
(1℃単位)

ECモード
2℃~25℃
(1℃単位)



FMS-125GSX




FMS-175GSX



FMS-305GSX

棚網寸法(mm)

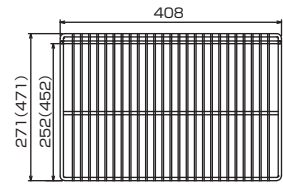

FMS-125GSX/175GSX/(305GSX)

特 徴

- 横幅50センチで省スペース設置が可能
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用具標準装備

	型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質 量	標準価格(税抜)
スリム型薬用保冷库 MediFridge	FMS-125GSX ※1	121L	W500×D450(548)×H1,430mm	3枚	64kg	257,000円
	FMS-175GSX ※1	179L	W500×D450(548)×H1,870mm	5枚	76kg	299,000円
	FMS-305GSX	303L	W500×D650(748)×H1,870mm	5枚	88kg	357,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

※1 転倒防止処置必須
※全機種転倒防止処置を推奨します。

薬用保冷库 MediFridge

製品の詳細はこちら▶



HCモード
3℃~5℃
(1℃単位)

ECモード
2℃~25℃
(1℃単位)



FMS-505GXの扉開放時



FMS-1004Gの扉開放時



FMS-305GUX



FMS-505GX




FMS-1004G

特 徴

- 対結露性能が格段に向上
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用具標準装備

	型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質 量	標準価格(税抜)
薬用保冷库 MediFridge	FMS-305GUX ※1	300L	W800×D450(548)×H1,870mm	10枚	100kg	369,000円
	FMS-505GX	500L	W800×D650(748)×H1,870mm	10枚	112kg	612,000円
	FMS-1004G	1,020L	W1,550×D650(748)×H1,870mm	15枚	198kg	979,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

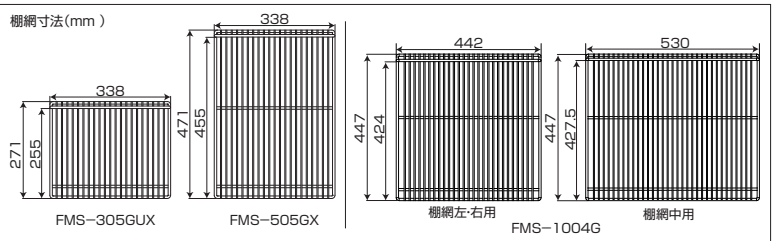

薬用冷蔵ショーケース

製品の詳細はこちら▶



2℃~14℃
(1℃単位)

LED照明付仕様
(オプション)
標準価格 30,300円(税抜)

特 徴


- モデルチェンジにより従来製品より省エネ性・庫内容量アップ
- 庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減
- 転倒防止用具標準装備




FMS-800GH



スライドラック仕様 (FMS-500GH-SR)
(FMS-800GH-SR)
●薬品やサンプルの出し入れに便利です。
※スライドラックは右側半分のみです。

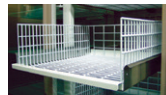

棚網寸法(mm)

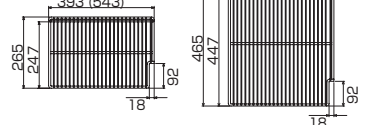

	型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質 量	標準価格(税抜)
薬用冷蔵ショーケース	FMS-300GH ※1	341L	W900×D450(500)×H1,917mm	10枚	128kg	358,000円
	FMS-400GH ※1	494L	W1,200×D450(500)×H1,917mm	10枚	138kg	484,000円
	FMS-500GH	585L	W900×D650(700)×H1,917mm	10枚	134kg	594,000円
	FMS-800GH	827L	W1,200×D650(700)×H1,917mm	10枚	156kg	809,000円
薬用冷蔵ショーケース スライドラック仕様	FMS-500GH-SR	515L	W900×D650(700)×H1,917mm	5枚	144kg	671,000円
	FMS-800GH-SR	757L	W1,200×D650(700)×H1,917mm	5枚	168kg	886,000円

※環境によっては構造上結露が発生する場合があります。対結露性能を向上したMediFridgeシリーズをおすすめします。



ノンフロン冷媒採用

オプション
P21・22

※1 転倒防止処置必須
※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL https://www.galilei.co.jp

薬用保冷库

製品の詳細はこちら▶



2℃~23℃
(1℃単位)




FMS-650L



FMS-1400L

※写真はサーモレコーダー(オプション)付です。

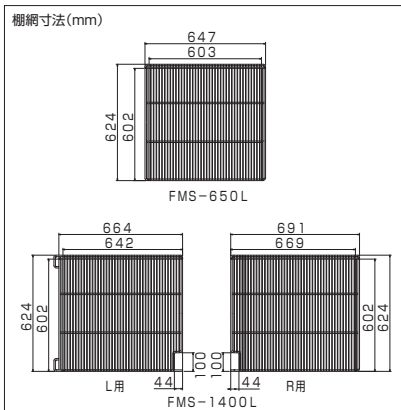

特徴

- 大容量保管タイプの薬用保冷库。側面ダクト採用で温度ムラ軽減
- サービコンセント、測定孔標準装備にて様々な用途で使用可能
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用具標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法※()内突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
薬用保冷库	FMS-650L	635L	W770×D795(893)×H1,905mm	4枚	126kg	770,000円
	FMS-1400L	1,355L	W1,500×D795(893)×H1,905mm	8枚	206kg	1,001,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge



製品の詳細はこちら▶



冷蔵室
2℃~14℃
(1℃単位)

冷凍室
-30℃~-20℃
(1℃単位)



FMS-F155GSX




FMS-F305GX



FMS-F405GX



FMS-F405GX
冷凍室
バスケット 4個
棚板 4枚
標準装備

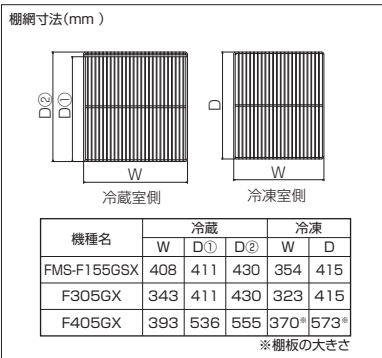

特徴

- 小さい設置面積で、大容量の薬用冷凍冷蔵庫
- 冷凍室は棚網式、高さ可変で使い勝手が向上(FMS-F155GSX・F305GX)
- FMS-F405GXは棚板式でバスケット4個標準装備
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 転倒防止用具標準装備

	型番	有効内容積	外形寸法※()内突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)
薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge	FMS-F155GSX	冷蔵室 173L 冷凍室 62L	W500×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 3枚 冷凍室 1枚	95kg	388,000円
	FMS-F305GX	冷蔵室 315L 冷凍室 113L	W800×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 2枚	132kg	486,000円
	FMS-F405GX	冷蔵室 432L 冷凍室 176L	W900×D750(848)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 4枚	145kg	717,000円

ガラス窓のない仕様にもできます。

※全機種転倒防止処置を推奨します。

メディカルフリーザー パーソナル

製品の詳細はこちら▶




-40℃~-15℃
(5℃単位)



FMF-038F1-C



FMF-038F1

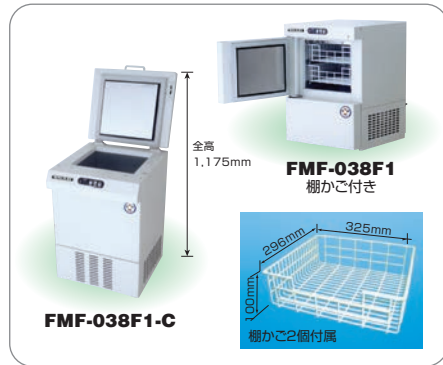

特徴

- 実験台の上にも下にも置ける「場所をとらない」パーソナルタイプ
- 40℃~-15℃(5℃単位)の幅広い範囲で温度設定可
- サーモレコーダー(オプション)取付で、少量の凍結血漿保管にも最適

	型番	有効内容積	外形寸法	カゴ	質量	標準価格(税抜)
メディカルフリーザー パーソナル	FMF-038F1-C	37L	W480×D520×H770mm	なし	45kg	242,000円
	FMF-038F1	38L	W483×D513×H717mm	2個	45kg	242,000円

メディカルフリーザー MediFridge

製品の詳細はこちら▶



-30℃~-20℃
(1℃単位)

2室独立
制御式



FMF-301F



FMF-501F



FMF-501FD

特徴

- 全バスケット同一サイズなので、優れた収納性
- 壁面冷却により安定した庫内温度を実現
- 4輪自在キャスターにより、移設も楽々
- 偏芯軸によるオートクローズ扉
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備
- 耐震レッグ(オプション)にて転倒防止対応可能

バスケット標準装備

一つのバスケットに、マイクロプレート10枚1セットを12セット収納可能
(バスケット14個でマイクロプレート計1,680枚収納可能)

※FMF-301Fは7個付
FMF-501Fは14個付
FMF-501FDは12個付



	型番	有効内容積	外形寸法※()内突起物含む最大寸法	バスケット	質量	標準価格(税抜)
メディカルフリーザー MediFridge	FMF-301F	300L	W500×D729(777)×H1,795mm	7個	95kg	308,000円
	FMF-501F	548L	W820×D729(777)×H1,795mm	14個	125kg	418,000円
	FMF-501FD	516L	W820×D729(792)×H1,795mm	12個	144kg	495,000円

※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>



ノンフロン冷媒採用

オプション
P21・22

低温インキュベーター 標準モデル LAB Line

製品の詳細はこちら▶

**-15℃~50℃**0.5℃単位
(35℃~40℃は0.1℃単位)**FMU-054I**

※施設装置・照明はオプション対応

**FMU-133I****FMU-263I**

オプション



FMU-054I用専用架台
外形寸法:W600×D600×H750mm
標準価格:45,000円(税抜)


FMU-133I/100I-HC用専用架台
外形寸法:W820×D586×H1,175mm
標準価格:65,000円(税抜)

FMU-204I/180I-HC用専用架台
外形寸法:W820×D816×H1,175mm
標準価格:85,000円(税抜)

遮光板

FMU-133I、204I、100I-HC、180I-HC用
標準価格:7,200円(税抜)

FMU-263I、404I、230I-HC、380I-HC用
標準価格:12,100円(税抜)

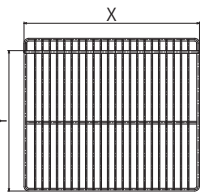

棚網寸法 (mm)

機種名	X	Y
FMU-054I	385	302
FMU-133/263I	561	313
FMU-204/404I	558	518

特 徴

- 15℃~50℃の幅広い範囲で温度設定可
- 下吹き出し、上吸い込みで、試料の乾燥を低減
- プログラム運転(8ステップ2パターン)で、多用途で使用可能
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備

低温インキュベーター



型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質 量	標準価格(税抜)
FMU-054I	50L	W483×D487(554)×H685mm	2枚	40kg	299,000円
FMU-133I	130L	W700×D502(569)×H1,107mm	3枚	70kg	383,000円
FMU-204I	207L	W700×D732(799)×H1,107mm	3枚	100kg	465,000円
FMU-263I	259L	W700×D502(569)×H1,677mm	5枚	95kg	548,000円
FMU-404I	408L	W700×D732(799)×H1,677mm	5枚	120kg	781,000円

※遮光板は、FMU-054Iは標準装備。他の機種はオプション。

ガラス窓のない仕様にもできます。

低温インキュベーター ワイドレンジモデル LAB Line

製品の詳細はこちら▶

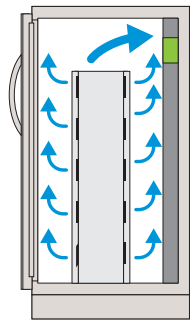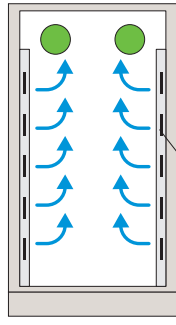**HC EC****-20℃~60℃**0.5℃単位
(35℃~40℃は0.1℃単位)**HC EC** 切替可能**FMU-100I-HC****FMU-230I-HC**ワイドレンジモデル
(側面図)
側面ダクト採用
(イメージ図)ワイドレンジモデル
(正面図)

棚網寸法 (mm)

328	588
70	542(内寸)
FMU-100I-HC FMU-230I-HC	
537	588
70	542(内寸)
FMU-180I-HC FMU-380I-HC	

特 徴

- 20℃~60℃の範囲で温度設定可
- 側面ダクトを採用し、温度ムラをより一層軽減
- プログラム運転(8ステップ2パターン)で、多用途で使用可能
- 閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備

低温インキュベーター
ワイドレンジモデル

型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質 量	標準価格(税抜)
FMU-100I-HC	106L	W700×D502(598)×H1,107mm	2枚	84kg	438,000円
FMU-180I-HC	178L	W700×D732(828)×H1,107mm	2枚	95kg	526,000円
FMU-230I-HC	230L	W700×D502(598)×H1,677mm	5枚	115kg	633,000円
FMU-380I-HC	383L	W700×D732(828)×H1,677mm	5枚	130kg	875,000円

※遮光板は、オプション。

ガラス窓のない仕様にもできます。

※全機種転倒防止処置を推奨します。

超低温フリーザー Vital

製品の詳細はこちら▶

**-80℃~60℃**

デュアル冷却方式

**FMD-D350ESH**

単相100V

デュアル冷却方式

**FMD-D520ETH**

三相200V


-90℃~-50℃

二元冷却方式

**FMD-W330ESH**

単相100V


デュアル冷却方式

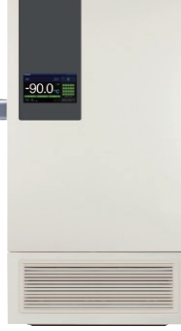**FMD-D600ETRL**

三相200V

フィルターレス

デュアル冷却方式

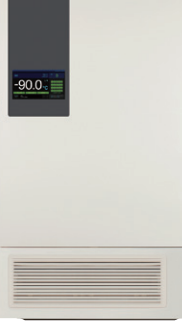**FMD-D700ETRL**

三相200V

フィルターレス

特 徴

- 冷凍回路が二つあるデュアル冷却方式
※FMD-W330ESH除く
- 環境負荷の少ないノンフロン冷媒*を採用
※FMD-D600ETRL・FWD-D700ETRL除く
- 真空断熱材採用(全機種)
- 電磁ロック搭載(FMD-D600ETRL・FWD-D700ETRL)
- フィルターレス(FMD-D600ETRL・FWD-D700ETRL)
- 高温異常・低温異常等の各警報および
外部警報機能を標準装備(全機種)

超低温フリーザー

型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	棚板数	質 量	プラグ形状	標準価格(税抜)
FMD-D350ESH	350L	W670(741)×D875(980)×H1,850mm	3枚	250kg	㊦ 単相100V	1,815,000円
FMD-D520ETH	519L	W770(841)×D875(980)×H1,990mm	3枚	290kg	㊦ 三相200V	2,255,000円
FMD-W330ESH	330L	W750(816)×D875(980)×H1,850mm	3枚	258kg	㊦ 単相100V	1,298,000円
FMD-D600ETRL	603L	W1,030(1,119)×D875(980)×H1,990mm	3枚	359kg	※ 三相200V	2,563,000円
FMD-D700ETRL	706L	W1,180(1,269)×D875(980)×H1,990mm	3枚	377kg	※ 三相200V	2,838,000円

※丸端子出し

超低温フリーザー(二元冷却式)

製品の詳細はこちら▶

**-85℃~-20℃**

特 徴

- 安定した超低温環境を実現
- 冷凍サイクル監視機能を標準装備

**FMD-300D1****FMD-500E1**

補助冷却装置(オプション)

停電または冷凍機の故障など万一の際に
液化炭酸ガスをフリーザー庫内に噴射させ
庫内の温度上昇を防ぎます。
※別途炭酸ガスボンベが必要です。

型式:
RS-BUT1(100V用)
RS-BUT2(200V用)超低温フリーザー
アップライト型

型 番	有効内容積	外形寸法	棚枚数	質 量	プラグ形状	標準価格(税抜)
FMD-500E1	519L	W853×D980×H1,990mm	3枚	285kg	※ 三相200V	1,870,000円
FMD-700E1	717L	W1,093×D980×H1,990mm	3枚	320kg	※ 三相200V	2,530,000円
FMD-200D1	200L	W1,080×D903×H1,100mm		210kg	㊦ 単相100V	1,375,000円
FMD-300D1	360L	W1,740×D903×H980mm		255kg	㊦ 単相100V	1,485,000円
FMD-500D1	516L	W1,930×D903×H1,120mm		275kg	※ 三相200V	1,925,000円
FMD-700D1	752L	W2,520×D903×H1,120mm		320kg	※ 三相200V	2,420,000円

※丸端子出し
写真は温度記録計(オプション)付です。

ノンフロン冷媒採用
※FMD-D350ESHとFMD-D520ETHは
HC系混合冷媒、FMD-W330ESHはHC冷媒です。



※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

超低温フリーザー(シングルコンプレッサー)・ノンフロンタイプ

-80℃ -60℃

- 特 徴
- シングルコンプレッサーのため、優れたコストパフォーマンス
 - 単相100Vで使用可能
 - データロガー取付(オプション)で温度記録可能



LAB8s



PRO21

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
超低温フリーザー (-80℃)	LAB8s	90L	W600×D730×H865mm	48kg	550,000円
	LAB11	130L	W725×D730×H865mm	53kg	670,000円
	LAB21	230L	W1,055×D730×H865mm	66kg	770,000円
	LAB31	300L	W1,305×D730×H865mm	78kg	900,000円
	LAB41	365L	W1,505×D730×H865mm	83kg	1,030,000円
超低温フリーザー (-60℃)	PRO11	130L	W725×D730×H865mm	53kg	400,000円
	PRO21	230L	W1,055×D730×H865mm	66kg	460,000円
	PRO31	300L	W1,305×D730×H865mm	78kg	520,000円
	PRO41	365L	W1,505×D730×H865mm	83kg	600,000円
	PRO60	480L	W1,705×D730×H865mm	95kg	740,000円

血液用冷蔵庫

4℃ 固定

医療機器


製造販売認証番号
FMB-121G 230AGBZX00033000
FMB-181G 230AGBZX00034000
FMB-301G 230AGBZX00032000

※特定保守管理医療機器(クラスII)に該当します。

背面用転倒防止金具(標準装備)



脚用耐震固定金具(標準装備)

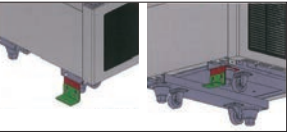

※別途取付作業費が発生します。





FMB-121G



FMB-181G



FMB-301G

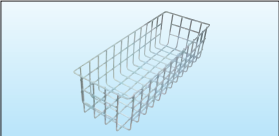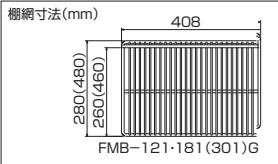

血液バッグ収納バスケット(オプション)
FMB-121G・181G用
(内寸)W150.5×D254×H117mm
標準価格:3,300円(税抜)
FMB-301G用
(内寸)W150.5×D454×H117mm
標準価格:3,700円(税抜)

- 特 徴
- 横幅50センチで省スペース設置が可能
 - 内扉を設けず、ワンアクションで素早く血液製剤の出し入れ可能
 - 背面用転倒防止用金具・脚用耐震固定金具標準装備

※本製品は医療機器です。販売にあたっては、高度管理医療機器等、販売業・賃貸業の許可が必要です。
※本製品は改造対応ができません。

	型 番	有効内容積	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	質 量	標準価格(税抜)
血液用冷蔵庫	FMB-121G ※1	121L	W500×D450(548)×H1,430mm	66kg	495,000円
	FMB-181G ※1	179L	W500×D450(548)×H1,870mm	77kg	605,000円
	FMB-301G ※1	303L	W500×D650(748)×H1,870mm	90kg	737,000円

※1 転倒防止処置必須
※全機種転倒防止処置を推奨します。

車載コールドボックス

-20℃~38℃

DC電源タイプ(シガーソケット給電)

バッテリータイプ(単相100V充電)



T0022/FDH



T0032/FDH



T0056/FDH Auo



T0082/FDH Auo

- 特 徴
- DCタイプは車のシガーソケットから給電
 - バッテリータイプは取り外し可能なバッテリーをAC100Vで事前充電することで輸送中も冷却運転できます
 - 専用アプリを使用し、Bluetooth接続でHACCP温度管理が可能
 - 約8時間でフル充電完了、駆動時間は約7時間
(T0056/FDHの場合。試験条件：外気温30℃、冷凍運転)



T0056/FDH Auo

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
車載コールドボックス	T0022/FDH	DC電源タイプ	18L	W375×D585×H480mm	25kg
	T0032/FDH	DC電源タイプ	25L	W390×D670×H480mm	25kg
	T0056/FDH Auo	バッテリータイプ	46L	W495×D800×H500mm	40kg
	T0082/FDH Auo	バッテリータイプ	64L	W560×D940×H550mm	40kg

コールドベンチ

冷凍・冷蔵切替式
冷凍-20℃・冷蔵5℃



FMC-61PNBSAXL

- 特 徴
- 低温を維持しながらの作業に最適
 - インバーター式で省エネ・急速冷却・安定制御を実現
 - 手すり部分をフラットにし作業性の向上
 - エコカバーを標準装備。待機時の冷氣漏れ抑制
 - ワンタッチで冷凍・冷蔵の温度切り替え可能

- パトライト装備
冷凍仕様か冷蔵仕様かを確認
取付位置は
末尾L 正面向かって左
末尾R 正面向かって右
になります



- 排水蒸発装置
蒸発体を使用した高性能タイプ



- 見やすい温度表示



- エコカバー
使いやすく優れた収納性
待機時に省エネ



	型 番	ワークエリア	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	質 量	標準価格(税抜)
コールドベンチ	FMC-41PNBSAXL(R)	W986×D766mm	W1,200×D900×H800mm	140kg	1,114,000円
	FMC-61PNBSAXL(R)	W1,586×D766mm	W1,800×D900×H800mm	165kg	1,433,000円

オプション P21・22 ※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL https://www.galilei.co.jp

卓上型クリーンベンチ(垂直気流型)〈清浄度：ISO-5(クラス100)〉

製品の詳細はこちら▶



FMM-240TCB

- 耐久性の高いガラス製シャッターを採用
- DCターボファンを採用し、省エネと低騒音を実現
〈FMM-240TCB:54dB(JIS規格に基づく試験)〉
- 作業姿勢を考慮し、傾斜構造のシャッターガラス面を採用
- スイッチとコンセントを前面外部に配置し、操作性を向上
- 省エネ・チラつき化防止のために蛍光灯用インバーター安定器を採用

※本製品は安全キャビネットとしてご使用いただけません。

フットスイッチ付きガスバーナー標準装備



※ご注文時、都市ガスかプロパンガスかをお知らせ下さい。

	型 番	ワークエリア	外形寸法 ※()内 突起物含む最大寸法	質 量	標準価格(税抜)
卓上型クリーンベンチ	FMM-240TCB	W995×D510×H555mm	W1,000(1,050)×D575×H825mm	57kg	682,000円
	FMM-320TCB	W1,295×D510×H555mm	W1,300(1,350)×D575×H825mm	71kg	847,000円

純水生成装置

製品の詳細はこちら▶



FMP-0110

- イオン交換膜と逆浸透膜による純水生成
(1μS /cm以下の純水を生成)
- コンパクトな卓上タイプなので、省スペース
- 水量が多い(36ℓ/hの生成能力)
- 器具洗浄、自動分析、染色水用、細胞培養、試薬調整などに使用可能

	型 番	貯水タンク	外形寸法	標準価格(税抜)
純水生成装置	FMP-0110	Φ279×H368	W320×D380×H388mm	550,000円
	FMP-0130	Φ389×H626	W320×D380×H388mm	583,000円

※全機種転倒防止処置を推奨します。

インバーター制御 業務用冷蔵庫

The Galilei シリーズ

-5℃～10℃
(1℃単位)

フロンラベル
B
地球温暖化への影響

- インバーター制御を採用し、大幅な省エネを実現しています
- はめ込み式扉3重パッキンを採用し冷気漏れの軽減と清掃性の向上をしています
- 定期的に霜取りが入ります



GRD-120RM-F



GRD-180RM

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)	冷 媒	封入量	GWP
業務用冷蔵庫	GRD-120RM-F	1,088L	W1,200×D800×H1,950mm	125kg	1,262,000円	R134a	200g	1430
	GRD-150RM-F	1,379L	W1,490×D800×H1,950mm	145kg	1,433,000円	R134a	220g	1430
	GRD-180RM	1,674L	W1,790×D800×H1,950mm	160kg	1,479,000円	R134a	220g	1430

※上記機種以外にも様々なサイズがございます。※この製品は排水設備が必要です。

スライド扉リーチインショーケース キュービックタイプ (ドリンク用)

3℃～10℃
(1℃単位)

フロンラベル
B
地球温暖化への影響

- コンパクトなサイズで大容量
- フィルター清掃不要
- 漏電遮断器を標準装備

CRC-060GSWSR



CRC-080GLWSR



	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)	冷 媒	封入量	GWP
スライド扉リーチイン ショーケース キュービックタイプ	CRC-060GSWSR	141L	W630×D550×H1,080mm	55kg	203,000円	R134a	100g	1430
	CRC-080GSWSR	173L	W750×D550×H1,080mm	60kg	240,000円	R134a	90g	1430
	CRC-080GLWSR	265L	W750×D550×H1,410mm	70kg	295,000円	R134a	100g	1430
	CRU-060GSWSR	109L	W630×D450×H1,080mm	50kg	186,000円	R134a	100g	1430
	CRU-080GSWSR	134L	W750×D450×H1,080mm	55kg	201,000円	R134a	100g	1430
	CRU-080GLWSR	205L	W750×D450×H1,410mm	65kg	258,000円	R134a	100g	1430

製氷機 (キューブアイス・チップアイス・フレークアイス) **MIRACLEAR**

製氷能力

25kg ～ 480kg

様々なバリエーションがあります

- 節水性と省電力の優れた製氷機です
- 汚れがつきにくく、拭き取りやすいクリアコーティングを採用しています(外装前パネル・扉・機械室パネル)



FIC-A25KT5



FIC-A100CT

	型 番	製氷能力	貯水量	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
製氷機(キューブアイス)	FIC-A25KT5	25kg	約13.5kg	W398×D450×H800mm	37kg	454,000円
製氷機(チップアイス)	FIC-A35KT5	35kg	約17kg	W500×D450×H800mm	43kg	587,000円
製氷機(フレークアイス)	FIC-A100CT	100kg	約34kg	W600×D600×H800mm	61kg	1,019,000円
	FIC-A120FT	120kg	約24kg	W600×D600×H800mm	61kg	944,000円

※上記機種以外にも様々なサイズがございます。 ※この製品は給排水設備が必要です。

コールドロッカー

2℃～12℃
(1℃単位)
全室同一温度

- 8室個別管理型の冷蔵ロッカー
- 手間の要らない全自動霜取り式
- 食品の一時保冷などに



HPK-8R9



内箱の取り外しが簡単

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
コールドロッカー	HPK-8R9	36L×8室(計288L)	W1,000×D544(569)×H1,815mm	145kg	756,000円

オプション
P21・22

※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

蓄冷剤用急速凍結専用庫

-30℃以下

R-448A採用

GKD-082FMD1-S

特 徴

- 蓄冷剤は再凍結して何回も使えて経済的
氷やドライアイスよりランニングコストが低減できます
- ※ドライアイスは凍傷の危険性があり、炭酸ガスの発生にも充分に注意が必要です

	型 番	有効内容積	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
蓄冷剤用急速凍結専用庫	GKD-082FMD1-S	475L	W755×D800(870)×H1,950mm	125kg	1,807,000円

※この製品は排水設備が必要です。

ブラストチラー/ショックフリーザー

-40℃～10℃

特 徴

- 熱い食材・試料等を急速に冷却・凍結します
- 独自の吸い込み循環方式で優れた冷却性能を発揮します
- 庫内構造の清掃性を高め、庫内乾燥モードも標準装備しています
- USBポート(オプション)で、運転データの保存が可能です

	型 番	収容能力	外形寸法	質 量	標準価格(税抜)
ブラストチラー/ ショックフリーザー	QXF-012SFSV2	1/1 ホテルパン又はグリッド 12枚	W770×D880(932)×H1,882mm	225kg	3,520,000円
	QXF-006SFLT2	1/1 ホテルパン又はグリッド 6枚	W1,200×D750(802)×H800mm	145kg	1,980,000円

※この製品は排水設備が必要です。※写真はホテルパン(オプション)付きです。

プレハブ型冷蔵庫・冷凍庫・恒温庫(インキュベーター)

製品の詳細はこちら▶



冷凍機一体型タイプ



冷凍機別置型タイプ

特 徴

- グループ会社 ガリレイパネルクリエイト(株)による、安心・安全なパネル施工
- ご希望のサイズに設計可能
- 多種多様な用途に対応可能

■ 冷凍機一体型と冷凍機別置き型の違い

	一体型	別置型
メリット	・工事コストが安い	・容量・サイズの自由度が高い ・室内に熱がこもりにくい
デメリット	・室内に排熱がこもり、高圧カット等が起る可能性がある ・容量・サイズの選択肢が狭い	・工事コストがかかる

※全機種転倒防止処置を推奨します。

プレハブ庫 構造

●冷蔵庫 -3℃以上

●冷凍庫 -20℃～-18℃

パネル組立式だからサイズ、温度帯、設置条件など
お客様のご要望に合わせてフレキシブルに対応可能。


用途に合わせた高品質パネル

- 冷蔵庫…フラットパネル仕様(リネル厚44mm)
- 冷凍庫…フラットパネル仕様(リネル厚100mm)

間取り寸法一覧

※別寸もご相談に応じます。

- 庫内高さ
・1,900mm
・2,200mm
・2,400mm

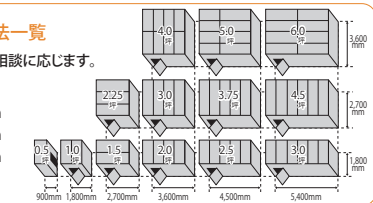

温度計(デジタルはオプションです)

ドアスイッチ(オプション)

ドアの開閉に連動してファンの
運転を制御する省エネ機器です。

庫内灯(庫内側)

白熱灯型LED
直管型LED
(共に低温型、防滴型)も
準備できます。

リリーフ弁

庫内空気の膨張を調整する圧力
調整弁(冷凍庫のみ)

押し棒&安全脱出ハンドル

万が一、閉じこめられた場合に
中から簡単に扉を開けることが
できます。

省エネカーテン(オプション)

商品の出し入れ時、庫内からの
冷気もれを最小限におさえます。

クーリングユニット

(冷凍機一体型の場合)

プレハブコントローラー

アラーム4 (オプション) 温度異常・火報・監禁警報を集中監視

壁パネル

天井パネル

手動片引スライド扉

コーナーパネル

スノコ(樹脂製)

床パネルを保護し、冷気の循環
をよくします。(床パネル付のみ)

床パネル

樹脂ベース

庫内灯スイッチ

標準ハンドル

用途に応じて選べる扉

片開き扉、両開き扉、片引スライド扉(手動・自動)、
小扉、スイング扉パネル表面材は、カラー鋼板仕様(ソフアイボリー色)
の他に、ステンレス鋼板もご用意しています。

主な特長

1 ガリレイならではの
省エネ設計プレハブコントローラーにより、庫内温度に合
わせて冷凍機を最適に制御。庫内温度を一定に
キープします。過剰な冷却を防ぎ省エネになり
ます。
※セレクトタイプの場合

2 オーダーメイド設計

パネル組立式なので設置場所のスペースに
合わせて自由に設計できます。

3 スピーディな施工

パネル組立式なので工期が短くスピーディに
プレハブ冷蔵庫・冷凍庫が完成します。

4 選べる温度帯

貯蔵物に合わせて、冷蔵から冷凍までさま
ざまな温度帯に対応できます。

- 冷蔵庫: -3℃以上
- 冷凍庫: -20℃～-18℃

5 気配り安全設計



庫内の閉じ込めを防止する安全脱出ハンドル
や庫内で安全に作業できる庫内灯など随所に
安全設計を施しています。6 econea
ノンフロンパネル「econea」新発泡剤「HFO(ハイドロフルオロレフィン)」
に切り替え、品質と環境配慮を両立させた高
性能なノンフロンパネル「econea(エコネア)」
シリーズを使用しています。

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫導入事例

病院

冷蔵庫

薬剤・薬品の保管・厨房での食材保管

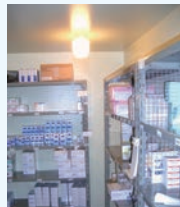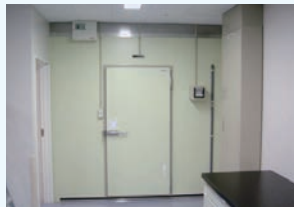



製薬会社

冷蔵庫

薬剤の冷蔵保管

冷凍庫

新薬の保管

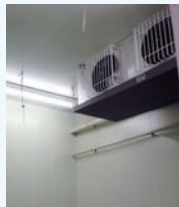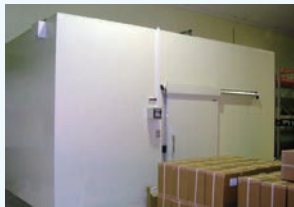

食品工場

冷蔵庫

食品の保管

冷凍庫

食品の冷凍保管

恒温庫

食品の発酵

◆トータルプランニングも可能です



大学

冷蔵庫


薬剤・検体の保管

低温実験室

低温下での研究

恒温庫

育成・培養

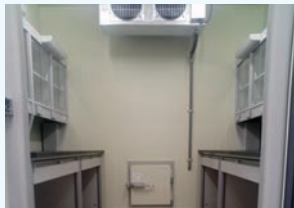オプション
P21・22※全機種転倒防止処置を推奨します。
※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galilei.co.jp>

温度測定関連

ミニ温度計データロガー testo 174T

温度センサ内蔵の1ch温度ロガー



専用USBインターフェースアダプタ付
testo 174Tセット

- 低温は-30℃まで測定可能

温度計データロガー testo 175T1

サーミスタ内蔵の1ch温度ロガー



- 低温は-35℃まで測定可能
- SDカードでのデータ収集対応

温度モニタリングシステム testo Saveris

プレハブ冷蔵庫などから離れた場所での温度監視に



- 無線で離れた場所からPCで温度監視
 - 警報機能有り
- ※カスタマイズ商品です。お客様が管理したい内容をご連絡下さい。

	型番	測定範囲	外形寸法	電池寿命	標準価格(税抜)
温度測定関連	testo 174Tセット	-30℃～+70℃	60×38×18.5mm	約500日	22,000円
	testo 175T1	-35℃～+55℃	89×53×27mm	約3年	26,000円

※様々なサイズがございます。



IoTで食の安全管理を確実に

HACCP管理サポートシステム

温度管理プラン

冷機器温度の自動記録

店舗の冷機器の温度を24時間自動で監視・記録。異常発生時の自動通報を行います。

冷凍冷蔵庫 ショーケース プレハブ庫

データはWEBで閲覧

クラウド上にデータが蓄積されるため、本部や店舗などどこからでも同じデータを閲覧可能。

24時間365日監視・記録

自動記録で信頼性の高い記録データを実現し、手作業による記録漏れやミスを解消!温度以外にも機器の状態も記録します。

異常時にはメールで通知

機器の異常が発生した場合にはメールでアラート発信。設備管理における人手不足の解消と商品ロスを防ぎます。

データはダウンロード可能

必要な時に必要な分だけダウンロードして利用可能。ペーパーレスで管理業務の軽減につながります。

衛生管理プラン

食品温度の記録管理

専用温度計で測定した商品の温度データを自動で記録。作業中や食品などのデータと共にクラウドに記録されます。

タブレット+中心/放射温度計

検収や調理時に誰が何を測定したかを記録

衛生管理の記録管理

タブレットにて個人衛生記録や施設の清掃記録などを行うことでクラウドに記録されます。

・個人衛生記録 ・各種一般衛生記録など
・非接触体温計に対応


お持ちのスマホやPCから管理状況を確認いただけます。

- ・各種マスター管理
- ・記録データの蓄積
- ・帳票出力

・各種HACCP手引書に準拠(対応手引書は随時追加)
・実施結果の電子承認機能を実装
組織的HACCP管理をサポート

製薬業界向け機器集中管理システム トリプルエス SSSマスター

- 製薬業界向け電子データ規格 FDA 21CFR Part.11 準拠
- 施設内の全ての機器を1台のパソコンで効率的な一括管理
- データの自動保存による、記録漏れ等のリスク回避
- 各測定値の異常をリアルタイムに監視
- 改ざん防止機能、閲覧権限設定ほか

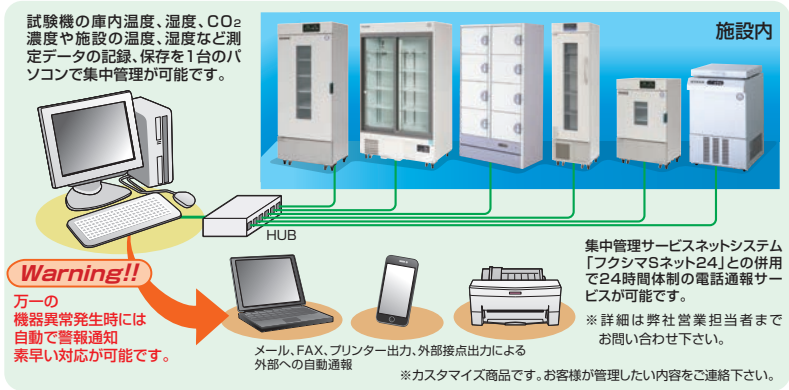

※全機種転倒防止処置を推奨します。

保守契約のご案内

製品を安全に安心してご使用いただくため、弊社ではお客様に保守契約をお奨めしております。

弊社顧客管理により、突然のトラブル時にも迅速な対応が可能。365日体制でお応えします!!

常に安心してお使いいただけます。

契約のメリット

- ①年間契約により年2回の定期点検を実施、故障を事前にチェックします。
- ②点検リストにより、迅速かつ的確な修理を実施、安全性を高めます。
- ③損害に陥る危険性のある故障を限りなく減らし、安心してご使用になれます。
- ④定期点検の実施により、消費電力低減と機器の高寿命化を図ります。
- ⑤年間契約の為、年間の予算計上ができ、計画性を持って設備投資ができます。
- ⑥一年間契約で更新の選択は自由です。また、保証期間中の契約が可能です。

定期点検により運転状況をチェック

故障を未然に防止

故障時の修理代金無料

ランニングコストの低減



バリデーションサポートサービスのご案内

製品性能(試験・検査)の品質の適切性を据付(IQ)/稼働(OQ)の各段階で立証し文書化し、書類にて報告します。

打ち合わせ	測定温度、測定箇所、測定時間、判定基準等を確認。
計画書提出	打ち合わせ内容に基づいてIQ・OQ実施計画書を作成/提出し、お客様に確認していただく。
IQ/OQ実施	計画書の内容に沿ってIQ/OQ作業を実施。 IQ：据付時適格性確認 OQ：稼働性能適格性確認
報告書提出	測定データをもとに報告書を作成、提出。 提出書類：報告書、記録計校正証明書、センサー校正証明書、温度測定データ等

商品名	薬用保冷库、薬用冷凍冷蔵庫、低温インキュベーター、超低温フリーザー、薬用冷蔵ショーケース、メディカルフリーザー、コールドベンチ、その他
測定点	お客様のご要望により、別途打合
料金	お客様のご要望により、別途見積

お客様のご要望にお応えし、選べるパターンをご用意。

測定点数、温度帯などお客様のご希望に合ったご提案が可能です。

	ライトバリデーション	ベーシックバリデーション
IQ点検内容	製品点検(マイコン設定確認は行わない)	製品点検(マイコン設定確認も含む)
OQ点検内容	目視による温度確認チェックは除く	目視による温度確認チェックも含む
打合せに合わせた書類変更	不可	可

その他マッピング対応も可能です。お気軽にご相談ください。

導入前チェック事項

- ①保管物の保管条件をご確認ください。
- ②有効内容積の6割を目安に製品の必要な大きさを選んでください。保管物の詰めすぎは、保管物が冷えなかったり、消費電力量が大きくなったりといった事が考えられます。
- ③設置環境をご確認ください。空調の有無、夜間空調の使用・不使用など。高温・多湿は製品の寿命を縮め、結露、霜付きが起きやすくなる原因となります。
- ④電源をご確認下さい。正常な運転を妨げる原因となります。
- ⑤コンセント形状をご確認下さい。
- ⑥扉の開きをご確認下さい。弊社製品は右開き扉・左開き扉の変更が可能です(出荷時のみオプション)。
- ⑦設置スペース及び隣接する機器が高温になるものかをご確認下さい。
- ⑧搬入経路をご確認下さい(エレベーターの使用可否、扉の開口など)。

○搬入をご希望の場合、搬入条件をお知らせください。

オプション
P21・22

※仕様図(一部機種を除く)はホームページからダウンロードできます。
URL <https://www.galliei.co.jp>

●FMSシリーズ オプション



サーモレコーダー
(記録用紙 1年付き)



麻薬金庫
大型:W305×D214×H363mm
小型:W255×D150×H215mm




遮光フィルム仕様



ガラスなし扉仕様




右開き仕様
標準左開きの逆となります。

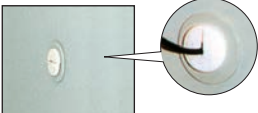

測定孔
内径φ40




背面用転倒防止金具 (標準装備)

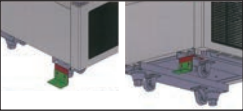


脚用耐震固定金具 (オプション)
※別途取付作業費が発生します。
※血液用冷蔵庫はどちらも標準装備です。



脚用転倒防止金具アンカー不要仕様 (オプション)
※別途取付作業費が発生します。

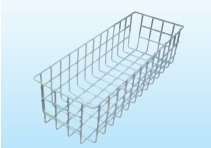


収納バスケット
大型:W162.5×D466×H123mm
小型:W162.5×D266×H123mm

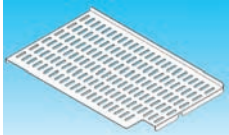

フラット棚
(小瓶用バンチングプレート)



スライドラック仕様
●薬品やサンプルの出し入れに便利です。
※スライドラックは右側半分のみです。
※FMS-1004Gは左側半分のみです。

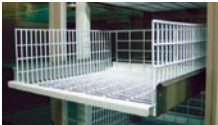

保冷枕収納棚
○FMS-F155GSX用
標準価格:10,000円(税別)
保冷枕が10個収納できます
○FMS-F305GX用
標準価格:20,000円(税別)
保冷枕が20個収納できます
※保冷枕はオプションです。

	標準価格 (税抜)	薬用保冷库 MediFridge			薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge			スリム型薬用保冷库 MediFridge		薬用保冷库		薬用冷蔵ショーケース(スライド仕様共通)
		FMS-305GUX, 505GX, 1004G	FMS-F155GSX	FMS-F305GX	FMS-F405GX	FMS-125GSX, 175GSX, 305GSX	FMS-650L	FMS-1400L				
サーモレコーダー	61,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サーモレコーダー取付金具	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
麻薬金庫(大型)	27,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
麻薬金庫(大型)取付金具	7,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
麻薬金庫(小型)	25,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
麻薬金庫(小型)取付金具	6,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮光フィルム仕様(2枚扉)	42,000円	※1	×	○	○	×	×	○	○	○	○	○
遮光フィルム仕様(1枚扉)	21,000円	×	○	×	×	○	○	×	○	×	×	×
ガラスなし扉仕様	0円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
右開き仕様	右記参照	—	14,000円	—	—	7,000円	11,000円	—	—	—	—	—
測定孔	25,000円	○	○※2	○※2	○※2	○	—	—	○	○	○	○
バンチングプレート	↺	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スライドラック	77,000円	↺	×	×	×	↺	×	×	×	×	↺	↺
外部警報接点出力(無電圧接点)	4,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
停電警報ブザーキット	13,200円	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
脚用耐震固定金具(2個セット)	8,800円	○	○	○	○	○	↺	↺	○	○	○	○
脚用転倒防止金具アンカー不要仕様	49,700円	○	○	○	○	○	↺	↺	○	○	○	○
棚板(棚受け4個付き)	右記参照	305GUX 2,100円 505GX 2,700円 1004G 4,600円(中置) 4,200円(左置)	冷蔵室 2,900円 冷凍室 2,500円		冷蔵室 7,400円	125GSX 2,000円 175GSX 2,500円 305GSX	8,800円	9,700円 (左右ご指定 下さい)	300GH 3,200円 400GH 4,000円 500GH 3,900円 800GH 4,900円 (左右ご指定下さい)			
カラーバリエーション	0円	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×

○：オプション対応可能 —：標準で取付け ×：対応不可
↺：弊社または販売店にお問い合わせください。
※1：FMS-1004G遮光フィルム仕様(3枚扉)は63,000円
※2：冷凍室は取付位置の指定はできません。

●FMS-O55GMX オプション



小分け収納ケース
収納例



鍵付収納セット
使用例

		トレイ内寸	カラー	標準価格(税抜)
小分け 収納ケース	AT-8	W113×D73×H58	クリアホワイト	240円
	AT-10	W240×D73×H59	ライトグリーン	530円
	AT-11	W56×D70×H58	ライトイエロー	130円
	AT-14	W235×D75×H42	ライトブルー ピンク	360円
		引き出し内寸	カラー	標準価格(税抜)
鍵付き 収納セット	①	W213×D161×H110×1個	トウメイ/アンバー	24,200円
	②	W103×D160×H112×2個		29,000円
	③	W103×D160×H112×1個 W103×D162×H51×2個		36,500円
	④	W103×D162×H51×4個		44,200円
サーモレコーダー	61,000円			
サーモレコーダー取付金具	8,000円			
右開き仕様	7,000円			
停電ブザーキット	13,200円			
カラーバリエーション	0円			

●FMUシリーズ オプション

	FMU-054I	FMU-133I	FMU-204I	FMU-263I	FMU-404I	FMU-100I-HC	FMU-180I-HC	FMU-230I-HC	FMU-380I-HC
遮光板	—	7,200円		12,100円		7,200円		12,100円	
右開き仕様	11,000円								
照明タイマー仕様	32,000円								
鍵付き仕様	14,000円	—	—	—	—	—	—	—	—
架台(別途送料)	45,000円	65,000円	85,000円	×	×	65,000円	85,000円	×	×
ガラスなし扉仕様	0円								
棚板(棚受け4個付)	2,700円	3,600円	4,400円	3,600円	4,400円	4,800円	5,600円	4,800円	5,600円
脚用耐震固定金具(2個セット)	×	8,800円							
外部警報出力	4,200円								
停電ブザーキット	13,200円								

表中の価格は標準価格(税抜) — 標準装備 × 対応不可

●FMFシリーズ オプション

	標準価格(税抜)	FMF-501FD	FMF-501F	FMF-301F	FMF-038F1	FMF-038F1-C
サーモレコーダー	61,000円	○*	○	○	○	○
サーモレコーダー取付金具A	8,000円	○*	○	○	×	×
サーモレコーダー取付金具B	22,000円	×	×	×	○	○
外部警報出力	5,000円	○	○	○	○	○
バスケット	9,200円	○	○	○	×	×
棚板(棚受け4個付)	右記参照	7,400円	7,400円	5,300円	×	×
脚用耐震固定金具(2個セット)	8,800円	○	○	○	×	×
扉ラッチハンドル仕様	↺	○	○	○	×	×
右開き仕様	右記参照	14,000円	7,000円	7,000円	7,000円	×
停電ブザーキット	13,200円	○	○	○	×	×
カラーバリエーション	0円	○	○	○	×	×

※1室につきサーモレコーダーと取付金具が1個ずつ必要となります。

○ 対応可能 × 対応不可

●LABシリーズ オプション

■貯蔵ラック・ボックス(対象機種 LAB)

型 式	ラック寸法(mm)	収 納	標準価格(税抜)
KR-11	W140×D140×H610	11段収納ラック	25,000円
KR-06	W140×D140×H330	6段収納ラック	20,000円
KR-11D	W162×D151×H606	11段収納ラック	26,000円
KR-06D	W162×D151×H331	6段収納ラック	22,000円
KB-5D	W204×D156.5×H591	5段収納ボックス	28,000円
KB-3D	W204×D156.5×H355	3段収納ボックス	24,000円

■収納ラック・ボックス収容数

パターン①	LAB8	LAB11	LAB21	LAB31	LAB41
KR-11	3	6	12	18	21
KR-06	3	3	3	3	3
KR-11D	2	4	8	10	14
KR-06D	2	2	2	2	2
KB-5D	2	4	8	10	12
KB-3D	2	2	2	2	2

型式:KR-11

型式:KR-06

貯蔵ラック・
ボックス
収納に便利な
専用ラックです。
(対象機種 LAB)

型式:KB-5D

※上部取っ手付

●FMDシリーズ オプション

※その他のオプションについては当社担当へお問い合わせ下さい。

■補助冷却装置



型式:RS-BUT1(100V用)
RS-BUT2(200V用)



型式:COB-UP1-JP(100V用)
COB-UP2-JP(200V用)

停電または冷凍機の故障など万一の際に
液化炭酸ガスをフリーザー庫内に噴射させ
庫内の温度上昇を防ぐための装置です。

型 式	アップライト型		チェスト型		COB-BUT1	COB-BUT2	COB-UP1-JP	COB-UP2-JP
	RS-BUT1	RS-BUT2	RS-BUY1	RS-BUY2				
適用機種	FMD-200D1 FMD-D350ESH	FMD-500E1 FMD-700E1 FMD-D520ETH	FMD-300D1	FMD-500D1 FMD-700D1	FMD-D350ESH	FMD-D520ETH	FMD-W330ESH	FMD-D600ETRL FMD-D700ETRL
作動温度	高温警報設定温度(-70℃以上)							
取付位置	製品背面	製品背面	製品内蔵	製品内蔵	製品背面	製品背面	製品背面	製品背面
希望小売価格(税抜)	¥319,000	¥317,000	¥280,000	¥295,000	↺	↺	↺	↺

注)1.液化炭酸ガスボンベ(サイホン管式)およびレギュレーターは、お客様にてご準備ください。
2.ボンベは、周囲温度30℃以下となるところに設置してください。(周囲温度が31℃を超えると急速に冷却能力を失います。)
3.温度保持時間の目安は30kgボンベにて約7時間となります。(高温警報温度:-70℃、周囲温度:-30℃の場合)

■貯蔵ラック

軽量で耐久性の高いアルミ仕上げの
凍結チューブ収納ボックス専用アルミ製
ラックです。



型式:RS-R20T1



型式:RS-R10Y1

機 種	対応する貯蔵ラック	ラック最大収納数
FMD-500E1	RS-R20T1	計8個
	RS-R24T1	計8個
FMD-700E1	RS-R20T1	計12個
	RS-R24T1	計12個
FMD-200D1	RS-R07Y1	計15個
	RS-R054Y1	計15個
FMD-300D1	RS-R10Y1	計18個
	RS-R074Y1	計18個
FMD-500D1	RS-R12Y1	計21個
	RS-R094Y1	計21個
FMD-700D1	RS-R12Y1	計30個
	RS-R094Y1	計30個
FMD-D350ESH	RS-R16T1,RS-R20T1	各6個 計12個
FMD-D520ESH	RS-R20T1,RS-R24T1	各8個 計16個
FMD-W330ESH	RS-R16T1	計11個
FMD-D600ETRL	RS-R20T1	計19個
FMD-D700ETRL	RS-R20T1	計23個

型 式	ラック寸法	適合収納ボックス	収納量	希望小売価格(税抜)
RS-R16T1	W140×D571×H225mm	W134×D134×H52mm 以下	16	¥50,000
RS-R20T1	W140×D571×H281mm		20	¥52,800
RS-R24T1	W140×D571×H336mm		24	¥59,000
RS-R07Y1	W162×D157×H399mm	W148×D148×H52mm 以下	7	¥30,000
RS-R10Y1	W162×D157×H565mm		10	¥36,000
RS-R12Y1	W162×D157×H676mm		12	¥38,000
RS-R054Y1	W162×D157×H408mm	W148×D148×H78mm 以下	5	¥33,000
RS-R074Y1	W162×D157×H581mm		7	¥34,000
RS-R094Y1	W162×D157×H744mm		9	¥38,000

収納ボックスは別売品です。(同一サイズの市販品が使用可能です。)

使用上のご注意:
本製品は、爆発性物質および可燃性物質、さらにそれらを含む物質及び
それらの残留・混入する物質の保存には絶対に使用しないでください。

機器のメンテナンス・アフターサービスに関するご相談・お問い合わせは


○関東サービスセンター TEL 047-419-6491 ○関西サービスセンター TEL 06-6477-2863

フロンラベルについて

このフロンラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒の環境影響度（地球温暖化係数：GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。
業務用冷凍冷蔵庫および冷凍機内蔵型冷凍・冷蔵ショーケースは、それぞれの製品区分の出荷台数で加重平均した地球温暖化係数（GWP）が目標年度（2029年）において、目標値（150）を上回らないことが製造事業者等に義務付けられています。なお、当カタログの業務用冷凍冷蔵庫および冷凍・冷蔵ショーケースは、地球温暖化係数（GWP）の目標達成表示区分を右記のフロンラベル（簡易版）にて記載しています。

ご注意 冷凍冷蔵庫は、その機器に封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異なる冷媒を冷凍冷蔵庫機器に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。封入冷媒は機器本体の銘板に記載されています。指定された冷媒以外を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などにつきましては、機器メーカーやそれら冷媒の封入作業に関与していない設置業者は一切その責任を負えません。

■対象機種種のフロンラベル

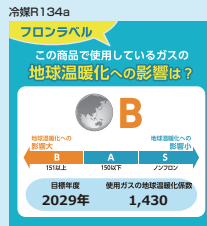

■当カタログの対象シリーズ

- ・インバーター制御 業務用冷蔵庫
- ・スライド扉リーチインショーケース キュービックタイプ

■フロンラベル表示の除外製品について

- ・業務用冷凍冷蔵庫で、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が-45℃未満のもの
- ・冷凍・冷蔵ショーケースで、圧縮機定格出力が750Wを超えるもの。

製品区分	目標年度	目標値
業務用冷凍冷蔵庫	2029	150
冷凍・冷蔵ショーケース	2029	150

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の製品は屋内用です。雨水のかららないところでご使用、保管下さい。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 据付、給排水、電気工事が必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。



左記ラベルが貼られている製品はフロンの回収が必要です。

ISO 9001:2015
認証取得

ISO 14001:2015
認証取得

滋賀(水口)工場・岡山工場
関西技術部・S&S事業部
東京技術部・東京工事業部
中部技術部・西日本技術部
滋賀(水口)工場・岡山工場
本社・東京・名古屋・福岡
関西サービスセンター・関東サービスセンター

GALILEI

Be cool, Be alive.



ホームページはこちら

●カタログ・仕様図のダウンロードは

URL <https://www.galilei.co.jp>

フクシマガリレイ株式会社

本社・FMS事業部（大阪） (06)6477-2121 大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

FMS事業部（東京） (03)6361-1956 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
FMS事業部（札幌） (011)833-1211 北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
FMS事業部（仙台） (022)259-1671 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部（名古屋） (052)559-2940 愛知県名古屋市中区金山5-13-24
FMS事業部（岡山） (086)245-0551 岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
FMS事業部（福岡） (092)474-5881 福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27

■東日本支社（東京）

・東京営業一部・二部・三部 Tel.03-5835-2183 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4
・東京営業四部・五部 Tel.03-3663-3052 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
・西東京営業所 Tel.042-548-0112 〒190-0013 東京都立川市富士見町2-32-20
・甲府営業所 Tel.055-275-0781 〒409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条253-1
・東京営業六部・七部 Tel.03-3663-3053 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-3 芳文社浅草橋ビル3F
・東京管理部 Tel.03-5835-2188 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4
・エンジニアリング部・製品部・エンジニア Tel.03-6361-0899 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4
北海道支店（札幌営業所） Tel.011-833-1211 〒003-0013 北海道札幌市白石区中央三条1-1-15
旭川営業所 Tel.0166-47-4366 〒079-8412 北海道旭川市永山2条20-10-2
函館営業所 Tel.0138-45-7030 〒040-0077 北海道函館市吉川町6-4
帯広営業所 Tel.0155-41-0611 〒080-0026 北海道帯広市西16条南1-18-5 オフィスフリーダム161 A4号室
北東北支店（盛岡営業所） Tel.019-631-2205 〒020-0866 岩手県盛岡市本宮町5-13-13
青森営業所 Tel.017-631-2066 〒030-0802 青森県青森市本町4-9-1
秋田営業所 Tel.018-825-9026 〒010-0001 秋田県秋田市中通5-1-39
南東北支店（仙台営業所） Tel.022-259-1671 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
山形営業所 Tel.023-634-0270 〒990-0061 山形県山形市五十鈴3-1-15
郡山営業所 Tel.024-924-7011 〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原98-1
千葉支店 Tel.043-266-0855 〒260-0844 千葉県千葉市中央区千葉寺町579-1
北関東支店（つくば営業所） Tel.029-839-3350 〒305-0074 茨城県つくば市高野台2-3-7
水戸営業所 Tel.029-244-5571 〒310-0912 茨城県水戸市見川12-153-3
宇都宮営業所 Tel.028-610-9907 〒321-0953 栃木県宇都宮市東信郷3-5-22
さいたま支店 Tel.048-654-0761 〒331-0804 埼玉県さいたま市北区土呂町2-45-1
高崎営業所 Tel.027-330-1210 〒370-0046 群馬県高崎市江木町1626-1
横浜支店 Tel.045-444-6140 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町3-12 16/Fヴィックマーズ横浜イースト1F

■中部支社（名古屋）

・名古屋営業一部・二部 Tel.052-559-2940 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山5-13-24
・豊橋営業所 Tel.0532-32-5546 〒441-8016 愛知県豊橋市新栄町字南小向41
・岐阜営業所 Tel.058-251-1350 〒501-0115 岐阜県岐阜市鏡島南1-6-50
・三重営業所 Tel.059-213-7374 〒514-0003 三重県津市栄町2-364 サニーハイツ102
信越支店（新潟営業所） Tel.025-285-0930 〒950-0943 新潟県新潟市中央区女池神明3-12-9
長岡営業所 Tel.0258-22-4571 〒940-2023 新潟県長岡市蓬瀛4-9-15
長野営業所 Tel.026-254-5163 〒381-0033 長野県長野市南高田2-1-21
松本営業所 Tel.0263-28-0565 〒399-0007 長野県松本市石芝3-5-6
静岡支店 Tel.054-238-8888 〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松2-24-33
沼津営業所 Tel.055-929-0880 〒410-0058 静岡県沼津市沼北町2-19-4
浜松営業所 Tel.053-468-1501 〒433-8122 静岡県浜松市中区上島4-4-16
北陸支店（金沢営業所） Tel.076-292-1560 〒921-8002 石川県金沢市玉鉾3-9
富山営業所 Tel.076-492-6630 〒939-8205 富山県富山市新根塚町1-4-39
福井営業所 Tel.0776-27-2345 〒918-8238 福井県福井市和田2-1905 ツタエビル1F

■関西支店（大阪）

・大阪営業一部・二部 Tel.06-6477-2052 ・エンジニアリング事業部 西日本エンジニア Tel.06-6477-2123
・大阪営業三部・四部 Tel.06-6477-2062 ・アジア事業部 Tel.06-6477-2051

京都支店 Tel.075-643-9390 〒612-8412 京都府京都市伏見区竹田中川原町356
滋賀営業所 Tel.077-551-5207 〒520-3033 滋賀県栗東市笠川125
南大阪支店 Tel.072-230-1808 〒599-8233 大阪府堺市中央区大野芝町187-11
奈良営業所 Tel.0742-32-2006 〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町157-1
和歌山営業所 Tel.073-472-9111 〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田34-1
神戸支店 Tel.078-578-9222 〒653-0015 兵庫県神戸市長田区菅原道4-202-4
姫路営業所 Tel.079-223-2482 〒670-0966 兵庫県姫路市延米1-7-2
岡山支店 Tel.086-245-0551 〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道1-1-11
鳥取営業所 Tel.0857-21-4592 〒680-0801 鳥取県鳥取市松並町2-239-2
広島支店 Tel.082-231-1231 〒730-0847 広島県広島市中区舟入南1-2-16
福山営業所 Tel.084-963-1827 〒720-2116 広島県福山市神辺町平野330
松江営業所 Tel.0852-21-9012 〒690-0011 島根県松江市東津田町1205-5 イースト1205 1F
山口営業所 Tel.083-932-0725 〒753-0872 山口県山口市朝田流通センター601-13 山口電子ビルF
四国支店（高松営業所） Tel.087-885-3393 〒761-8081 香川県高松市成合町16-18
徳島営業所 Tel.088-602-0340 〒770-0944 徳島県徳島市南昭和町6-18
松山営業所 Tel.089-956-2940 〒790-0922 愛媛県松山市星岡1-12-23
高知営業所 Tel.088-834-4100 〒781-8004 高知県高知市新田町20-41

■西日本支社（福岡）

福岡支店 Tel.092-474-5881 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27
北九州営業所 Tel.093-964-9539 〒802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町1-10-8-102
久留米営業所 Tel.0942-44-9400 〒839-0812 福岡県久留米市山ノ内安野3-12-56 オフィス/レア久留米 I A-1号室
佐賀営業所 Tel.0952-53-9151 〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野500-12
東九州支店（大分営業所） Tel.097-569-9161 〒870-0951 大分県大分市大字下町3462-1 オフィス/レア下町11号室
宮崎営業所 Tel.0985-48-1310 〒880-2103 宮崎県宮崎市大字生目字伊勢丸4526-2
都城営業所 Tel.0986-21-2101 〒885-0094 宮崎県都城都都原町7399-2
西九州支店（長崎営業所） Tel.095-881-1800 〒851-2106 長崎県西彼杵郡時津町左近郷79-1
佐世保営業所 Tel.0956-34-8605 〒857-1164 長崎県佐世保市白岳町126-1F
南九州支店（熊本営業所） Tel.096-389-2292 〒861-8035 熊本県熊本市東区御膳町8-12-31
鹿児島営業所 Tel.099-266-1310 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町3-121
沖縄支店 Tel.098-942-2788 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜5-5-1
石垣営業所 Tel.0980-83-2940 〒907-0003 沖縄県石垣市平得47
宮古島営業所 Tel.0980-73-7333 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良下里2154-14 M-Stay103号室

福島国際（香港）有限公司 Tel.852-2885-5679 Unit 903, 9/F, Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
アキマガリレイジャパン株式会社 Tel.65-6271-0460 1003 Bukit Merah Central #02-06 Singapore 159836
アキマガリレイマレーシア株式会社 Tel.60-3-2181-1034 Lot 6.01, 6th Floor Wisma Centre, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur Malaysia
アキマガリレイタイランド株式会社 Tel.66-2-258-3690 16 Asokor Court Gnd Fl., Room 2G, Sukhumvit 21 (Asokor) Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

アキマガリレイベトナム有限公司 Tel.84-28-3933-3628 8/F, PVC Sai Gon, 11Bis Nguyen Gia Thieu, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
アキマガリレイインドネシア株式会社 Tel.84-24-3755-6000 8/F TD Center Building, 4 Liew Gai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi Vietnam.
アキマガリレイ中国（上海）有限公司 Tel.86-21-6248-1512 中国上海市長寧区金鐘路658弄1号楼A316室
アキマガリレイ台湾（台北）有限公司 Tel.886-2-2521-9810 10449 台北市中山區中山北路二段112號12樓5室
アキマガリレイミャンマー株式会社 No.262, 12th street Ngwe Kyaw Yan 3 Quarter South Okkalapa Township, Yangon, Myanmar

ガリレイ（タイランド）株式会社 Tel.66-38-020-112 60/105 Moo 3, Malayangom Sub-District, Plukdaeng District, Rayong 21140, Thailand
アキマガリレイカンボジア株式会社 Tel.855-77-778-611 Executive Room#2-E6, The ICON Professional Building, 216 Norodom Boulevard, Tonle Baccas, Chaktomkorn, Phnom Penh, Cambodia.

アキマガリレイインドネシア株式会社 Tel.62-21-2709-5619 Ruko Wistaria 1 Lt.2 Jt. Panglima Polim No. 7A, Melawai
アキマガリレイフィリピン株式会社 Tel.63-917-679-0003 Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Unit 1715 One Park Drive 11th drive corner 9th Avenue, Bonifacio Global City Taguig City

製品についてのお問い合わせ、ご注文は



本カタログの記載内容は
2023年6月現在のものです。
(2306-25)G

カタログNo.

MD K-81