
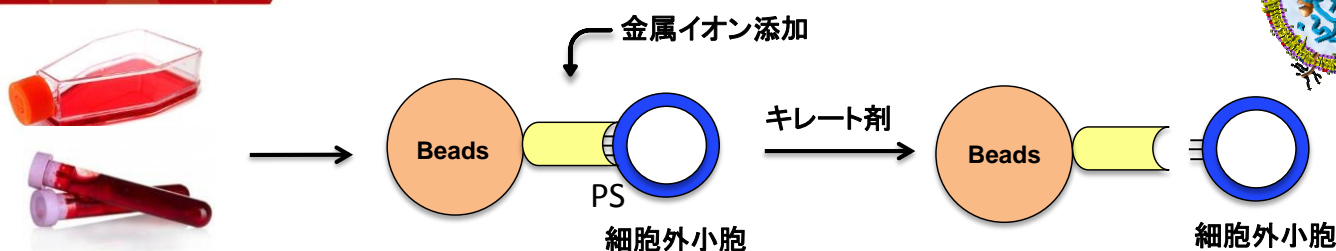


膜表面のホスファチジルセリン (PS) に対するアフィニティー法  
MagCapture™

# Exosome Isolation Kit PS

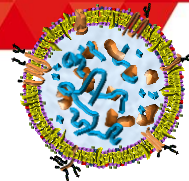


ホスファチジルセリン (PS) 結合分子を用いて細胞外小胞を金属イオン依存的に捕捉した後、キレート剤により溶出します。

## MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS 特長

新規アフィニティー  
精製法採用

PSアフィニティー分子による回収※  
低バックグラウンド  
キレート剤により中性条件下でマイルドに溶出

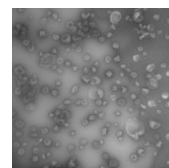

高純度・インタクト  
エクソソームを単離

超遠心分離不要

マグネティックビーズによる操作性アップ  
最適化されたプロトコール

高い実験再現性

対象サンプル：細胞培養上清、血清、尿など

EDTAやクエン酸などキレート剤処理血漿はサンプルとして使用することができません。  
キットをご購入前にご使用されるサンプルには十分お気をつけください。



発売記念キャンペーン

2016年2月末迄

45,000円

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)
293-77601	MagCapture™ Exosome Isolation Kit PS	10回用	<del>80,000</del>

Ref ...2~10℃保存 F ...-20℃保存 R ...-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 毒-I ...特定毒物 毒-I 毒-II ...毒物 劇-I 劇-II 劇-III ...劇物 毒 ...毒薬 劇 ...劇薬 危 ...危険物 向 ...向精神薬 特麻原 ...特定麻薬向精神薬原料  
 化審1 ...化審法 第一種特定化学物質 化審2 ...化審法 第二種特定化学物質 化兵1 ...化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 ...化学兵器禁止法 第二種指定物質 カルタヘナ ...カルタヘナ法  
 覚せい剤取締法...「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。  
 国民保護法...生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。  
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (http://www.siyaku.com/) をご参照ください。

●本文に記載しております試薬は、試験・研究用のみ使用されるもので、「医薬品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。  
 ●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。●希望納入価格は予告なく変更する場合がございますがご了承下さい。  
 ●掲載内容は、2015年11月時点での情報です。上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (http://www.siyaku.com/) をご参照下さい。

## 和光純薬工業株式会社

本社：〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL: 06-6203-1788(学術課)  
 東京本店：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL: 03-3270-8243(学術課)

- 九州営業所 TEL: 092-622-1005
- 中国営業所 TEL: 082-285-6381
- 東海営業所 TEL: 052-772-0788
- 藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351
- 筑波営業所 TEL: 029-858-2278
- 東北営業所 TEL: 022-222-3072
- 北海道営業所 TEL: 011-271-0285

フリーダイヤル: 0120-052-099 フリーファックス: 0120-052-806

15Y005開01J