



ニッポン・ジーン

TEVプロテアーゼ(Glycerol free) 30%OFFトライアルキャンペーン 期間:2022.9.14(水) - 10.14(金)

ご注文分まで

本ページをご覧くださいましたお客様へ、ニッポンジーンの新製品「TEV Protease (Glycerol free)」を上記期間中**30%OFF**でご提供いたします。本製品はグリセロールや界面活性剤等の添加剤を含まない最小限のバッファー組成のため、タンパク質の結晶構造解析等、タンパク質科学研究に用いる試料の調製に適しています。

販売店様に富士フィルム和光純薬のHPを見たとお伝えください！

Code No.	製品名	容量	通常価格	キャンペーン価格
314-09311	TEV Protease (Glycerol free)	1 mg	¥24,000	¥16,800

・本製品は理化学研究所放射光科学研究センター（生物系ビームライン基盤グループ）山本雅貴先生、竹下浩平先生との共同研究に付帯する技術支援のもとに(株)ニッポンジーンで開発されました。

1. 特長

- ・TEVプロテアーゼの認識配列を含む融合タンパク質からタグを切断
- ・アフィニティ精製用のタグ(8×His, 6×HN)が付加されたタンパク質
- ・グリセロールや界面活性剤などの添加剤を含まない
- ・タンパク質解析の試料調整に最適




2. 製品概要

起源	遺伝子組換え大腸菌
分子量	31.8 kDa
濃度	2 mg/mL
容量	1mg (500 μ L \times 1)
形状	20 mmol/l HEPES-NaOH (pH 7.0), 350 mmol/l NaCl, 1 mmol/l DTT
反応温度	4 ~ 30°C
保存温度	-80°C

3. データ例

基質（タグ融合タンパク質）2 μ gに各社TEVプロテアーゼ※1を加え30°Cで60分間反応させ、SDS-PAGEにて確認した。

(※1) 酵素添加量は各社マニュアルに記載の必要量を添加した。

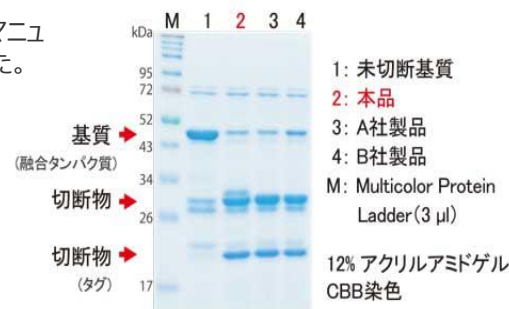

- 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

●九州営業所 ●中国営業所
●東海営業所 ●横浜営業所
●筑波営業所 ●東北営業所
●北海道営業所

フリーダイヤル 0120-052-099
試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■富士フイルム和光(香港)有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr. 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
广州市越秀区先烈中路69号东山广场20楼3002-3003室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)