

## L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)測定キット・キャンペーンのご案内

尿中L-FABP (L-type Fatty Acid Binding Protein:L型脂肪酸結合蛋白)をサンドイッチ法で比色定量するELISAキットです。

\*本製品は研究用です。診断用途には使用できません。

尿中L-FABPは近位尿細管の虚血、低酸素、酸化ストレスを反映して上昇することが多数報告されています。慢性腎臓病・急性腎障害の評価試験、薬剤による腎毒性評価試験、腎保護作用が期待される医薬品候補物質等の評価などにご使用ください。

### キャンペーン対象製品

| 和光コード     | コード No. | 品名                         | 容量           | 希望納入価格(税別) |
|-----------|---------|----------------------------|--------------|------------|
| 381-18711 | 009     | Canine L-FABP ELISA HS Kit | 96well/1プレート | 150,000円   |
| 389-19591 | 011     | Feline L-FABP ELISA HS Kit | 96well/1プレート | 150,000円   |

キャンペーン価格  
150,000円 → 135,000円 (税別)


10% OFF

キャンペーン期間：2026年2月5日(木)～5月1日(金)

※期間内にご注文いただいたキットが対象です。



### 測定原理

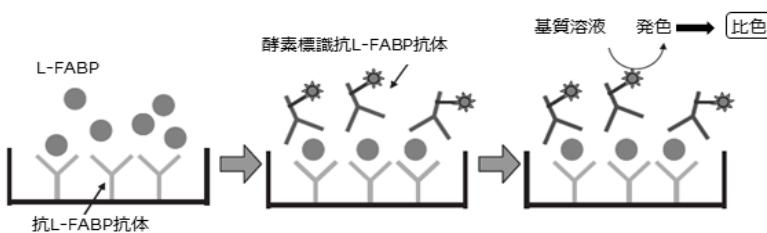

標準L-FABPまたは尿検体を前処理液で処理後、反応緩衝液を分注した抗L-FABP抗体固相化プレートに添加します。

プレートを洗浄し、二次抗体として酵素標識抗体を添加します。

プレートを洗浄し、基質溶液を加えて酵素反応を行い、吸光度を測定します。

全ての試薬をReady-to-useの状態で提供しているため、試薬調製の手間が少なく、調製ミスも抑えられます。

製品に関する詳細情報はコチラ

[fabp.jp](http://fabp.jp)



<https://www.fabp.jp>



微小循環障害(虚血)との関係、  
薬剤性腎症の評価試験結果など多数掲載中！

小動物専門の臨床検査会社 株式会社ランスにて、イヌとネコの尿中L-FABPの受託測定もお受けしております。

問い合わせ先：株式会社ランス  
TEL : 045-944-4442  
FAX : 045-944-4443  
E-mail : animal@lans-inc.co.jp



- 本パンフレットに掲載している製品は、試験・研究の目的にのみご使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 価格には別途消費税がかかります。
- 本キャンペーンは富士フィルム和光純薬(株)の販売代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

製造  
発売元

シミックホールディングス株式会社 L-FABP事業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S

TEL : 03-6779-8017 FAX : 03-6893-1578

販売元

富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目 1 番 2 号 TEL : 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目 4 番 1 号 TEL : 03-3270-8571 (代表)

試薬 HP <https://labchem-wako.fujifilm.com>

フリーダイヤル 0120-052-099

営業所：九州・中国・東海・横浜・筑波・東北・北海道